




LITS MÉDICAUX



TRANSFERT

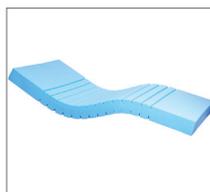

NUTRITION

PRÉVENTION D'ESCARRES



AIDES TECHNIQUES



HYGIÈNE

CONFORT

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés



Parmi toutes les aides techniques et matériels existant pour équiper vos patients, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Votre patient a besoin d'un fauteuil roulant ? Il rentre chez lui après une hospitalisation et a besoin d'aménager son domicile ? Quel type de lit choisir et quelles sont les diverses particularités de chaque modèle ? Vous hésitez sur la prescription du matelas anti-escarres adapté à votre patiente ?... Les réponses sont nombreuses, mais comment faire le bon choix ?

Vous connaissez parfaitement la pathologie de votre patient. Mais apporter les solutions techniques performantes pour rendre indépendance et autonomie à ceux qui en ont besoin, c'est le métier des professionnels du matériel médical, membres du réseau reha team.

Professionnels paramédicaux très qualifiés, ils assurent, sur prescription médicale ou non, la mise en place d'aides techniques appropriées, et leur suivi. Engagés sur une charte de qualité, tous les membres reha team conjuguent leurs savoir-faire, tant dans la commercialisation de produits toujours plus performants que dans la prestation de services adaptée.

Ils apportent aussi toute l'assistance technique et administrative dont vos patients peuvent avoir besoin.

Proximité, compétence, qualité... Ce guide des aides techniques médicales vous permettra de faire le bon choix et d'apporter le meilleur des solutions en fonction des besoins de vos patients.



Management System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 9105079484



1^{ER} RÉSEAU EUROPÉEN
DE DISTRIBUTEURS
DE MATÉRIEL MÉDICAL

reha team France

Centre d'Affaires, Parc d'Activités de Beaupty
Rue Jacques-Yves Cousteau, BP 739
85018 La Roche-sur-Yon Cedex

Tél 02 51 06 95 00

Fax 02 51 06 95 09

E-mail : info@reha-team.fr

LA CHAMBRE	4-9
Les lits médicaux	5
Les accessoires	7
Le positionnement	9
Les fauteuils	9
LE TRANSFERT À DOMICILE	10-13
Le transfert manuel	11
Le transfert passif	12
Le transfert actif	13
LA COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE À DOMICILE	14-18
La complémentation orale	15
Les solutions reha team	16
La nutrition entérale	18
LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DE L'ESCARRE	19-24
L'escarre un fléau national	20
Le traitement	21
Des solutions à fleur de peau	21
Risque nul : classes IA et IB	22
Risque moyen : classe 2	22
Risque élevé : classe 3	23
L'assise : le coussin	24
LA MOBILITÉ	25-35
Les aides techniques à la marche	26
Les fauteuils roulants adulte	28
Le tricycle pour adulte, une alternative plus légère	31
Les scooters	31
La mobilité enfant	32
Les sièges auto	33
Déambulation et verticalisation	33
Compagnon indispensable, le tricycle enfant	34
Porte-coquille	34
Les fauteuils roulants enfant	35
LES AIDES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN	36-42
Dans la cuisine	37
Côté salle de bains	38
Les accessoires	39
Les toilettes	40
L'autonomie	41
L'habillement	42
L'HYGIÈNE ET LE CONFORT	43-45
Incontinence légère/modérée	44
Incontinence modérée/forte	45
Les soins au quotidien	45
PRÉVENTION, SÉCURITÉ, REMISE EN FORME ET RÉÉDUCATION	46-49
Prévention et sécurité au domicile	47
Les téléphones	48
La remise en forme et la rééducation	49

NOS PAGES PRATIQUES **50**

Les différentes classes de matelas prévention d'escarres	51
Les classes de coussin prévention d'escarres	51
Législation, restez informé	51
Les prises en charge et les financements	52
Où nous trouver	54
Index général	55

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
www.reha-team.fr

Conception et réalisation :
 AGENCE OVNY - Les Herbiers

Photos non contractuelles de collections privées :
 3M SANTÉ, ABC, ASKLÉ SANTÉ, B. BRAUN MÉDICAL,
 CARPENTER, CREE, DJO, DUPONT MÉDICAL, FRANCE
 REHAB, FRANCIS LAVIGNE DÉVELOPPEMENT,
 GEEMARC TELECOM, HARTMANN, HMS-VILGO,
 HOLTEX, INNOV'SA, INVACARE, KETTLER, KINETEC,
 LACTALIS NUTRITION SANTÉ, MÉDICATLANTIC,
 MEDILAX, MEYRA, NUTRICIA, ONTEX HEALTHCARE,
 OTTO BOCK, PHARMAOUEST, RUPIANI, SCA HYGIÈNE
 PRODUCTS SA, SUNRISE MÉDICAL, SYST'AM,
 TEMPUR, TOPRO, VERMEIREN, FOTOLIA, reha team.

Document non contractuel.
 Édition Mars 2015.
 Toute copie ou reproduction interdite.



LA CHAMBRE

L'état de santé de votre patient ne lui permet plus d'utiliser son lit ou son fauteuil habituel et, confronté à ces difficultés nouvelles, vous devez lui apporter la solution qui correspond vraiment à ses besoins. Grâce à votre soutien et à une prescription en parfaite adéquation avec sa pathologie, votre patient sera rassuré et satisfait par un confort de vie optimisé.

Une large gamme de mobiliers et accessoires existe afin de faciliter son quotidien et celui de son entourage, et minimiser les risques liés à son état de santé. reha team vous guide pour faire le bon choix.



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

LES LITS MÉDICAUX

Les lits médicalisés répondent aux exigences de la norme européenne en vigueur. Ils sont conçus et fabriqués en conformité avec celle-ci. Disponibles à l'achat ou à la location, ils s'adaptent à la pathologie et à la morphologie du patient. Lit pour personnes agitées, lit grande largeur, lit double, ils peuvent aussi s'équiper de nombreux accessoires.



ACHAT OU LOCATION?

La prise en charge d'un lit médicalisé est à la location. La prise en charge à l'achat est assurée pour des besoins spécifiques du patient en raison de sa taille ou de sa pathologie ainsi que pour le lit double.

LIT MÉDICALISÉ STANDARD



Lit avec relève-buste électrique, relève-jambes manuel. Quatre roues à freins séparés, montage et démontage rapides, entretien facile. Existe en 2 ou 3 fonctions. Conforme à la norme EN1970/A1.

LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UN ACHAT

- Date
...../...../.....
- Achat d'un lit médicalisé à hauteur variable avec les accessoires :
 - Potence Barrières
 - Achat d'un matelas prévention d'escarres Préciser la classe*
 - Ou Achat d'un matelas simple

*Classe 1A
Classe 1B
Classe 2
Classe 3
Détails des classes en page 50

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD

Les lits pour personne de plus de 135 kg bénéficient d'une prise en charge spécifique.

POUR UNE LOCATION

- Date
...../...../.....
- Location d'un lit médicalisé 2 fonctions électriques avec :
 - Barrières
 - Achat d'un matelas prévention d'escarres Préciser la classe*
 - Ou Achat d'un matelas simple

*Classe 1A
Classe 1B
Classe 2
Classe 3
Détails des classes en page 50



PERMETTRE AU PATIENT DE DORMIR SANS BARRIÈRE LUI ÉVITERA UNE CHUTE NOCTURNE QUI PEUT PARFOIS S'AVÉRER SÉVÈRE. (FRACTURE DU COL DU FÉMUR, ETC.)

LE LIT POUR PERSONNES AGITÉES



Les lits pour personnes agitées disposent d'une large amplitude, ce qui leur permet de descendre plus bas qu'un lit classique, afin d'éviter les chutes graves. Certains modèles disposent également de panneaux capitonnés.

LE LIT DOUBLE



Lit destiné aux couples, équipé de deux sommiers indépendants, disponible en 2 x 70 cm ou 2 x 80 cm. Ces lits sont pourvus d'une large amplitude de mouvements, facilitant ainsi le coucher et le lever.

LE LIT GRANDE LARGEUR



Les lits grande largeur sont conçus pour les personnes de forte corpulence. La plupart des modèles proposent plusieurs largeurs et peuvent supporter jusqu'à 400 kg de charge. Ces lits sont destinés aux personnes de plus de 135 kg et bénéficient d'une prise en charge spécifique.

LE LIT ENFANT

Lit adapté à la morphologie des enfants. Sommier de largeur 80 cm pour une longueur de 1,60 m. Panneaux et habillage aux coloris chaleureux, s'intégrant parfaitement dans une chambre complète adaptée à l'univers des enfants. Freinage indépendant ou centralisé.



La location de lits pour enfants de 3 à 12 ans bénéficie d'une prise en charge LPPR spécifique. Le lit doit répondre aux critères suivants :

- Le lit doit posséder 3 fonctions électriques minimum
- La hauteur minimum doit être de 300 mm
- L'espace entre les barreaux des barrières doit être de 65 mm, et les barrières doivent aller de la tête aux pieds.




PENSEZ À PRESCRIRE UN MATELAS DE PRÉVENTION D'ESCARRES

Le matelas préventif est le binôme du lit, un matelas curatif est prescrit si le risque est important ou si l'escarre est constituée.

Retrouvez tous nos matelas et notre guide conseil pages 22 et 23.



Pour en savoir plus sur l'aménagement de la chambre de votre patient, flashez ce QR code

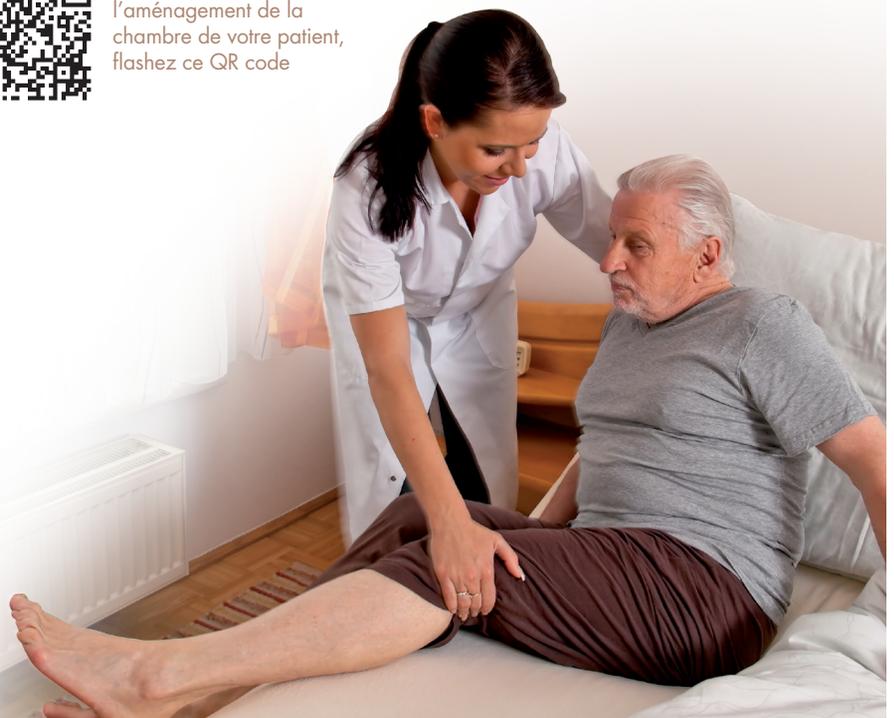

LES ACCESSOIRES

Des petits + bien confortables

Bien que pour la plupart non remboursées, ces aides techniques au quotidien apporteront une touche de confort supplémentaire à vos patients. Vous pouvez les orienter vers un accessoire tel qu'un oreiller cervical ou un réhausse-jambes, afin de soulager certaines douleurs.



LA POTENCE SUR PIED

Potence sur pied finition chromée.


Prise en charge uniquement en location



L'ARCEAU DE LIT


Une solution simple pour les personnes alitées ne pouvant pas supporter l'appui de draps et couvertures. Finition époxy couleur.

Prise en charge possible à l'achat

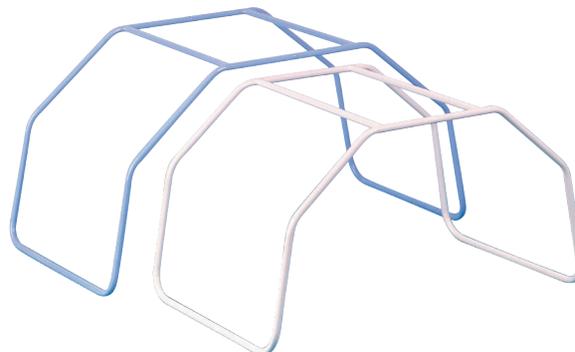

LE PIED À SÉRUM

Pied à sérum 4 branches.

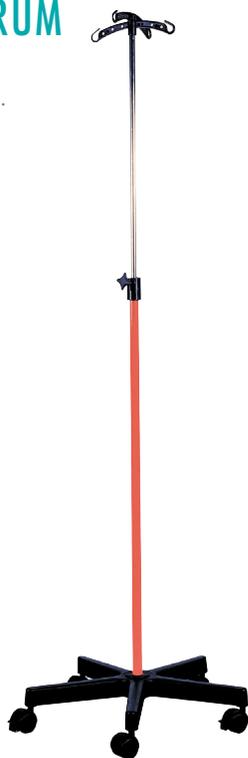

LE SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ

Aide technique conçue avec des ergothérapeutes, spécialisés en gériatrie, dans le but de favoriser la mobilité de nos aînés et réduire les interventions des soignants ou aidants. Aide le patient à se retourner de façon latérale, à se redresser et à se mettre debout ou à s'asseoir au bord du lit.



LA PROTECTION DE BARRIÈRE



Protection rembourrée pour une sécurité accrue au lit. Empêche le passage des membres et protège des chocs. Intérieur en mousse non feu M4, extérieur en PVC blanc non feu M1. Disponible à l'unité ou à la paire.

L'APPUI-DOS



Appui-dos avec tête et toile en nylon pour empêcher la transpiration. Plusieurs inclinaisons possibles de 0° à 70°.

LES TABLES À MANGER AU LIT

Table de lit, réglage par molette de la hauteur et de l'inclinaison du plateau.

Utilisable au fauteuil grâce au piétement en U.



Les tables de lit existent aussi à hauteur variable par vérins et avec deux plateaux indépendants, dont l'un est inclinable sur plusieurs positions.

LE REHAUSSE-JAMBES

Constitue un excellent moyen de prévention contre les sensations de jambes lourdes. Ajustable en hauteur, déhoussable et lavable.



L'OREILLER CERVICAL

L'oreiller en mousse viscoélastique offre toutes les qualités requises pour un sommeil réparateur. Sa forme anatomique respecte la courbure cervicale.



LE POSITIONNEMENT

Les aides techniques à la posture peuvent être proposées à votre patient dans le cadre de la prévention des escarres ou pour corriger un mauvais positionnement au lit. Composées de matériaux adaptés comme les microbilles ou les fibres, elles sont également disponibles pour certaines en plusieurs tailles et peuvent prétendre à une prise en charge.

LES AIDES À LA POSTURE

Coussin en mousse viscoélastique, conçu pour permettre une décharge talonnière totale, garantir le bon alignement orthopédique des membres inférieurs et limiter l'angle d'ouverture au niveau des genoux. S'adapte à toutes les morphologies. 2 dimensions.



Empêche les frictions des malléoles et des articulations des genoux, le croisement des jambes et le basculement latéral.



Accessoire de positionnement en fibres naturelles destinées à améliorer la posture au lit de vos patients. Gamme avec housse Pharmatex argent, tissu micromaillé, fibre.



Coussin décubitus semi-latéral



Coussin bouée



Coussin universel

LES FAUTEUILS

Votre patient a du mal à se relever seul de son fauteuil ? Sachez qu'il existe des fauteuils releveurs qui facilitent l'assise et la levée de l'utilisateur, et lui permettent de vaquer à ses occupations favorites sans le moindre effort. D'autres modèles de confort sont aussi disponibles chez reha team.

LE FAUTEUIL COQUILLE

Inclinaison aisée, manipulation facile pour l'accompagnant, transfert du patient sécurisé. Repose-jambes manuel, indépendant et réglable. Existe en version électrique pour une utilisation autonome ou par un tiers.



LES FAUTEUILS RELEVEURS

Les fauteuils releveurs électriques sont disponibles avec 1 ou 2 moteurs et proposent généralement un large choix de coloris et de revêtements.



La version bimoteur permet une assise personnalisée plus confortable.



LE TRANSFERT À DOMICILE

La mobilité, surtout lorsqu'elle est réduite, est très importante pour les personnes souffrant d'un handicap, pour les personnes dépendantes ou âgées. Leur permettre de pouvoir faire certains mouvements, se déplacer d'un endroit à un autre, être transféré du lit aux toilettes, passer de la position couchée à la position assise... des manipulations qui semblent banales mais qui s'avèrent parfois très techniques.

Certains obstacles comme les déficits du pied ou des membres inférieurs, les prothèses de hanche, l'hémiplégie, la maladie de Parkinson... viennent entraver les déplacements du patient, et nécessitent l'aide d'un soignant, avec des accessoires adaptés ou du matériel spécifique. reha team vous guidera pour trouver les produits les mieux adaptés aux besoins de vos patients.



LORS DE LIVRAISONS,
NOS TECHNICIENS REHA TEAM
FORMENT LE PATIENT ET SON
ENTOURAGE À L'UTILISATION
DU MATÉRIEL.



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

LE TRANSFERT DE VOS PATIENTS

Le transfert est un élément important pour votre patient et son entourage, dans le processus de maintien à domicile. Grâce au transfert, votre patient pourra conserver certaines habitudes de sa vie quotidienne, tout en vivant mieux avec son handicap. On distingue trois catégories de transfert :

- Le transfert manuel,
- Le transfert passif,
- Le transfert actif.

Trouver l'accessoire ou l'appareil le mieux adapté à votre patient, faciliter la tâche de l'équipe soignante ou du tiers... reha team peut vous guider dans votre choix de prescription.



LE TRANSFERT MANUEL

Il permet de passer de la position horizontale à la position assise au bord du lit, d'aller du lit au fauteuil, mais aussi de préparer la sortie du lit pour se mettre debout. Le sujet dépendant ou alité sur une longue période peut présenter des vertiges, ou avoir du mal à se positionner.

Les proches ou l'équipe soignante se doivent d'être patients pour laisser à l'organisme le temps de s'accoutumer au changement de position. La technique du transfert est très importante.

LE DRAP DE GLISSE

Drap de glisse permettant la réalisation de tout type de transferts par glissement. Existe en plusieurs dimensions.



BIEN RENSEIGNER LE PATIENT ET SON ENTOURAGE

Avant d'effectuer un transfert, l'équipe soignante ou l'aidant de votre patient doit le lui expliquer en détail. Solliciter la participation du patient est important, si minime soit-elle.

• La sécurité :

- la personne doit être protégée du risque de chutes. Les mouvements effectués pour le retournement ou le placement doivent être doux et l'attitude de l'aidant rassurante pour ne pas déclencher des réactions de défense, comme la rétropulsion.
- l'intervenant doit maîtriser les différentes techniques pour agir en toute sécurité pour lui et le patient.

• La préparation au transfert :

Il est utile de bien réfléchir au trajet le plus court possible. Il faut penser à verrouiller les roues du lit et du fauteuil et s'assurer que tout est bien prêt pour le transfert.

• La manipulation :

Il est primordial de faire attention aux membres fragiles des usagers pour ne pas créer de traumatismes et de lésions de la peau. Un aidant doit connaître ses limites et ne pas tenter de lever seul un patient trop lourd ou trop difficile à manipuler. Pour ce type de transfert, on peut utiliser des draps de glisse, des matelas de retournement, des planches...

LA PLANCHE DE TRANSFERT

Planche facilitant les transferts en position assise. Le patient glisse du lit au fauteuil et inversement.



LE TRANSFERT MANUEL

LA SANGLE DE RELEVAGE MANUELLE

Elle permet d'aider le patient à se lever ou s'asseoir. S'utilise en sous-fessier.



LA CEINTURE D'AIDE À LA MOBILITÉ

Peut être utilisée par le patient ou l'accompagnant. Poignées offrant une prise sûre et confortable. Plusieurs tailles disponibles.



LE DISQUE ROTATIF

Pour la giration en station debout, ce disque tournant en polypropylène sur structure en ABS permet une rotation sans résistance. Équipé d'une poignée de transport, il est pratique et facile à utiliser.



LE TRANSFERT PASSIF

Les patients dont la mobilité est vraiment réduite nécessitent l'utilisation de lève-personne ou de systèmes de transfert sur rail. Ce matériel leur permet d'accéder au fauteuil ou à la salle de bains en toute sécurité. Les sangles utilisées sont choisies en fonction de la taille du patient ou de la position qu'il doit prendre pendant son déplacement.

LE SYSTÈME DE LEVAGE SUR RAIL



S'adaptant à l'environnement des personnes en milieu hospitalier, ainsi qu'à domicile. La flexibilité des rails ou des portiques facilitent les déplacements en toute confiance.

LE LÈVE-PERSONNE

Lorsqu'un lève-personne est nécessaire, vous pouvez prescrire un modèle qui autorise les transferts en position assise. Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, ce lève-personne permet aux soignants d'assurer seuls ou à deux tous types de transferts, ainsi que le ramassage au sol.



LE TRANSFERT ACTIF

Chacun doit trouver les meilleurs appuis pour parvenir à la position souhaitée. Tout comme le transfert actif doit être préparé : la sécurité, la préparation au transfert et la manipulation du patient requièrent une bonne maîtrise de la technique et du matériel. Pour ce type de transfert on utilise généralement des mâts de transfert ou des appareils de verticalisation.

LE MÂT DE TRANSFERT

Le mât de transfert permet au patient actif de se mettre debout, avec l'aidant qui assure la rotation. Le mât soulage l'accompagnant et sécurise les transferts.



LE VERTICALISATEUR

Compact et simple d'utilisation, il permet de transporter rapidement les patients qui ont encore un peu de tonus au niveau du tronc et des membres inférieurs.

Sur certains modèles une sangle avec soutien fessier permet le transfert de personnes plus dépendantes.



LA BONNE PRESCRIPTION

LE LÈVE-PERSONNE EST PRIS EN CHARGE UNIQUEMENT À LA LOCATION


- Date
...../...../.....
- Location d'un lève-personne
Durée de la location :
- Achat de la sangle :

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.



LA RÉUSSITE DU TRANSFERT DÉPEND DU BON CHOIX DE LA SANGLE

Il existe de nombreux modèles de sangles : sangle universelle sans tête, sangle universelle avec tête, sangle universelle, sangle pour amputé...

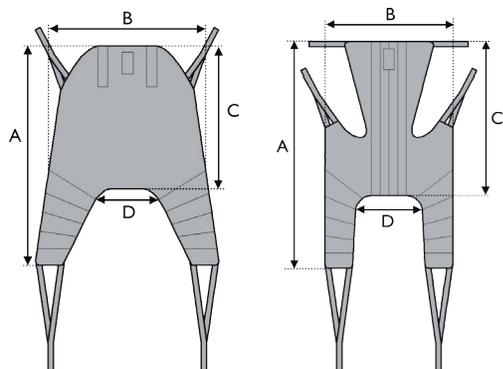



LA COMPLÉMENTATION NUTRITIONNELLE À DOMICILE

Quand l'état de santé de votre patient le permet, il se nourrit oralement et normalement. Mais lorsque certaines situations pathologiques ne le lui permettent plus, il lui faut, sur prescription médicale, des produits de complémentation orale ou entérale.

Les pages qui suivent vous guideront dans le choix des produits que nous mettons à votre disposition et vous renseigneront sur les services et prestations que nous pouvons apporter à vos patients.



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

LA COMPLÉMENTATION ORALE

Indications :

La complémentation nutritionnelle orale est nécessaire dans les cas suivants :

- Anorexies
- Difficultés d'accès à la nourriture
- Besoins protéino-énergétiques accrus
- Problèmes de mastication ou de déglutition (chirurgie ORL, dentaire)
- Dysfonctions ou sténoses de l'œsophage
- Situations pré/postopératoires
- Escarres.



ÊTRE À L'ÉCOUTE DE VOTRE PATIENT

Les besoins en complémentation orale sont souvent combinés à des facteurs extrinsèques propres à chaque patient, comme un trouble psychologique, une situation sociale particulière... Il peut aussi s'agir de suites pathologiques (douleur, stress, effet du traitement...) ou à une hospitalisation (jeûne, changements des repas...). Avant toute chose il est important de faire le point avec votre patient pour connaître le contexte dans lequel il évolue.



ATTEINDRE LES OBJECTIFS REHA TEAM

- Éviter une perte de poids ou maintenir un poids « cible »
- Compenser ou anticiper un déficit d'apport nutritionnel
- Améliorer la fonction musculaire et la mobilité physique
- Soutenir un traitement thérapeutique (chimiothérapie, etc.)
- Etc.



LES SOLUTIONS REHA TEAM*

*PRISE EN CHARGE
DANS LE CADRE
DU REMBOURSEMENT
EN VIGUEUR

LES PLATS MIXÉS

Pack de 4 plats mixés hyperprotidiques et hypercaloriques, prêts à l'emploi, stérilisés. 13 recettes disponibles. 500 kcal et 28 g de protéines par bol de 300 g.



LA CRÈME DESSERT HP HC

Crème dessert au lait entier hyperprotidique, hypercalorique, prête à l'emploi. Texture crémeuse 188 kcal, 11 g de protéines / pot de 125 g, 5 saveurs avec lactose, sans gluten.



LES POUDRES ÉPAISSISSANTES

Poudre épaississante utilisée pour le traitement de la dysphagie, des troubles de la déglutition ou fausses routes.



Complément protidique utilisé dans les cas de dénutrition et perte de poids.

LES COMPLÉMENTS HYPERPROTIDIQUES

Complémentation orale utilisée pour le traitement des escarres. Arômes fraise, vanille ou chocolat.



Boisson lactée hyperprotidique et hyperénergétique utilisée dans les cas de dénutrition. Cet aliment diététique existe en 2 arômes : vanille et fraise. Bouteille 200 ml, prête à l'emploi.



Compléments hyperprotidiques et hyperénergétiques utilisés dans les cas de dénutrition et de perte de poids. Nombreux arômes.

LES COMPLÉMENTS HYPERÉNERGÉTIQUES

Complément nutritionnel hyperprotéiné, hypercalorique. 400 kcal, 20 g de protéines, 5 g de fibres par brique. Sans lactose, sans gluten, saveur céréales ou fraise. Brique de 200 ml avec paille.



LES BOISSONS LACTÉES

Boisson lactée hyperprotidique et hypercalorique, recommandée dans les cas de dénutrition et de perte de poids. Nombreux arômes d'un naturel.



L'EAU GÉLIFIÉE

110 ml d'eau par pot de 120 g. 7 saveurs sucrées : fraise, citron, grenadine, pomme verte, café, fruits du verger, raisin ; 4 saveurs édulcorées : menthe, cola, orange, thé-pêche. Pack de 4 pots de 120 g chacun.



LES CRÈMES DESSERT

Crème dessert hyperprotéinée, hypercalorique. Sans lactose, sans gluten. 5 saveurs : vanille, abricot, caramel, chocolat, café. Le pack 4 pots de 200 g. 300 kcal et 20 g de protéines par pot.



LES COMPOTES

Dessert aux fruits protéiné. 4 saveurs : pomme-vanille, pomme-abricot, pomme-banane, pomme-fraise. 250 kcal et 9 g de protéines par coupelle. Sans gluten. Coupelle de 200 g.



LES PETITS GÂTEAUX

Galettes fourrées aux fruits hypercaloriques. 2 saveurs : pruneau ou framboise. 133 kcal / galette ; 5,5 g de protéines. Sources de fibres : 1g par biscuit.



LA BONNE PRESCRIPTION

Suite à une perte de poids supérieure ou égale à 5% du poids initial, l'état de santé de M nécessite une supplémentation médicale par voie orale, pour une durée :

- Initiale de mois
- Renouvellement de mois

Petit-déjeuner :

- Portion(s) de préparation Céréales Instantanées
- Pot(s) de crème HP/HC
- Briquette(s) lactée HC ou HP/HC*
- Briquette(s) lactée HP/HC enrichie en Fibres*
- Briquette(s) jus de fruit HP*

Repas midi et / ou soir :

- Portion(s) de mixé HP déshydraté
- Assiette(s) de mixé prêt à l'emploi HP/PC
- Potage(s) HP/HC prêt à l'emploi*
- Pot(s) de crème HP/HC
- Pot(s) de compote HP



LE RÔLE DE REHA TEAM

Chez reha team, vos patients seront suivis par une diététicienne diplômée, qui coordonne le retour à domicile et informe le patient, son entourage et l'équipe médicale. Elle assure également un service d'astreinte et établit les bilans nutritionnels des patients. Son rôle est primordial et central dans le processus de prise en charge de la nutrition à domicile, car son expertise permet le respect des volontés thérapeutiques du prescripteur et un suivi adapté à chaque patient.



Collations, nombre dans la journée :

- Pot(s) de crème HP/HC
- Pot(s) de compote HP
- Briquette(s) lactée HC ou HP/HC*
- Briquette(s) lactée HP/HC enrichie en Fibres*
- Briquette(s) jus de fruit HP*

Autres :

- Enrichissement en protéine : g/jour
- Pot(s) individuels d'eau gélifiée
- Boîtes d'épaississant neutre
-

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD

*Texture ne convenant pas aux patients atteints de troubles de la déglutition.

LA NUTRITION ENTÉRALE

La nutrition entérale (NE) consiste en l'apport de nutriments dans le tube digestif par l'intermédiaire d'une sonde, de façon à couvrir les besoins nutritionnels quotidiens ou à lutter contre une dénutrition lorsqu'il n'est plus possible de s'alimenter par voie orale ou que celle-ci n'est plus suffisante.



RESPECTEZ LES MODES D'ADMINISTRATION

Par gravité :

Si le tube digestif est normal et en l'absence d'une cause de gastroparésie ou de ralentissement du transit digestif, l'apport peut se faire par gravité, c'est-à-dire sans adjonction de pompe.

Parfois les patients préfèrent une nutrition entérale nocturne, pour garder leur autonomie dans la journée.

- Système avec poches plastiques souples de 500 ml, 1 L et 1,5 L.
- Systèmes avec flacons plastiques souples de 500 ml, 1 L et 1,5 L. Ce second système a l'avantage de pouvoir être stocké très facilement, et d'offrir un mode de connexion de la tubulure au flacon avec lequel on ne risque pas de se piquer. Tous deux combinent plusieurs intérêts : asepsie optimisée, volume plus important des conteneurs, absence de fragilité car ce sont des flacons en plastique (à combustion non polluante), très bonne protection contre l'oxydation. À noter que l'on peut également les conserver à la température ambiante.

Par pompe :

Si le tube digestif est pathologique l'apport doit être étalé sur 12, 18 et parfois 24 heures, sous contrôle d'une pompe. Renseignez-vous auprès de votre conseiller reha team, qui saura vous proposer des produits performants et adaptés à vos patients.



LE RÔLE DE REHA TEAM

Chez reha team, vos patients seront suivis par une diététicienne diplômée, qui coordonne le retour à domicile et informe le patient, son entourage et l'équipe médicale. Elle assure également un service d'astreinte et établit les bilans nutritionnels des patients.

Son rôle est primordial et central dans le processus de prise en charge de la nutrition à domicile, car son expertise permet le respect des volontés thérapeutiques du prescripteur et un suivi adapté à chaque patient.

Pour la nutrition entérale, elle informe et conseille votre patient et l'équipe médicale sur les bonnes pratiques et gestes à adopter concernant les règles d'hygiène.





LA PRÉVENTION ET LE TRAITEMENT DE L'ESCARRE

L'escarre est une pathologie à part entière, qui est devenue un problème majeur de santé publique. Mais ce n'est pas une fatalité et des progrès importants ont été réalisés en matière de traitements curatifs. Le meilleur moyen de lutter contre ce fléau repose sur la prévention, fondamentale dans le processus de soins aux patients. Elle implique une concertation entre celui-ci, vous, médecin et les partenaires médicaux. C'est ensemble que vous définirez et mettrez en place un support d'aide à la prévention et au traitement de l'escarre.

Bien choisir le matelas ou surmatelas de votre patient, son coussin, est un préalable indispensable et pas toujours simple car leurs composants sont nombreux.

Les techniciens reha team vous aident, grâce à ce guide, à réaliser ces choix compliqués.

Toutefois quand l'escarre est là, il faut penser curatif ! Les patients nécessitant un matelas pour pallier à un type d'escarre sont nombreux. Il est essentiel de favoriser au mieux la guérison de l'escarre. reha team privilégie avant tout la qualité des soins et des supports pour vos patients.



sourire à la vie!

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés



L'ESCARRE, UN FLÉAU NATIONAL

En France, la prévalence* moyenne de l'escarre chez les patients hospitalisés est de 8,6%. L'incidence** est de 4,3%.

Les chiffres varient selon l'activité :

	Prévalence	Incidence
Court séjour hors réanimation	7 %	3,2 %
Réanimation	-	22,6 %
Soins de suites	7 %	2,5 %
Long séjour	10,1 %	5,8 %
Maison de retraite	4,3 %	2,8 %

L'âge moyen des porteurs d'escarres est de 74 ans. Chez les blessés médullaires à la phase aiguë, 30% présentent des escarres lors de leur admission en service de rééducation, retardant ainsi de 3 mois en moyenne le processus de rééducation. Plus de 85% des patients développent au moins une escarre durant leur vie.

* prévalence : nombre de patients porteurs d'escarre un jour donné.

** incidence : proportion de patients développant une escarre au cours de leur séjour.

Prévention : Analyse du risque d'escarre

La prévention des escarres passe obligatoirement par une évaluation précoce des personnes susceptibles de développer une plaie. Nous vous proposons d'analyser ce risque en utilisant l'échelle de NORTON. Selon le score et la pathologie du patient, une série de mesures sera mise en place.

Échelle de Norton

Condition physique	État mental	Activité	Mobilité	Incontinence
Bonne	Bon, alerte	Déambule normalement	Normale	Aucune
Moyenne	Apathique	Marche avec une aide	Diminuée	Occasionnelle
Pauvre	Confus	Assis au fauteuil	Très limitée	Urinaire
Très mauvaise	Inconscient	Totalement aidé	Immobile	Urinaire et fécale

Un score de 16 ou moins indique un patient à risque de développer une escarre. **SCORE TOTAL**

Risque	Nul à très faible	Faible	Faible à moyen	Moyen à élevé	Élevé
Score de Norton	20 à 17	16 à 15	14 à 13	12 à 9	8 à 5



LE CHOIX FONDAMENTAL DU MATELAS : PRÉVENTIF OU CURATIF ?

Conçu pour répartir les pressions sur toute la surface du corps du patient, le matelas à but «préventif» est généralement composé de mousse viscoélastique, avec ou sans décharge talonnière. Monobloc ou modulaire, il est proposé en simple ou multiportance. Son choix est fondamental et demande des connaissances techniques approfondies.

Nos conseillers peuvent vous guider vers le produit adéquat. En cas d'apparition de rougeur ou de phlyctènes, il faut impérativement avoir recours à un support «curatif» tel que le matelas à air basse pression.



LA PRÉVENTION

En fonction des résultats obtenus grâce aux diverses échelles, on peut procéder au choix du matelas. Les matelas sont généralement classifiés selon le risque d'escarres encouru.



LE TRAITEMENT

Lorsque l'escarre est là, dès le premier stade, il n'est plus question de prévention mais de traitement. reha team mise sur la qualité en vous proposant des matelas et surmatelas à air motorisé. Les spécialistes reha team sont à votre disposition pour vous guider, vous livrer et installer votre matériel.

LES MATELAS À AIR

Matelas à air motorisé automatique calculant la pression de gonflage adaptée à la morphologie de la personne soignée. Trois modes proposés : alterné, statique basse pression et soins.



Matelas à air motorisé à basses pressions alternées, constitué de 20 cellules amovibles (dont une cellule de décharge talonnière et une cellule anti-équin), de 6 sangles de maintien, d'un compresseur avec microprocesseur intégré et d'une housse en nylon avec enduction PU (fonction auto-adjust).
Dimensions : 200 x 90 x 20,3 cm.



POUR VOS PATIENTS, DES SOLUTIONS À FLEUR DE PEAU

Dès que des érythèmes ou plaies se manifestent, il faut absolument soigner et protéger la peau à l'aide, par exemple, d'un film protecteur qui limitera les frottements entre la zone abîmée et les agents nocifs comme l'urine.

LA SOLUTION HUILEUSE

Formule complète contenant des éléments nécessaires à la prévention des escarres : acides gras essentiels, tocophérols, aloe vera et centella asiatica. Facile d'utilisation, absorption rapide et odeur agréable de romarin.



LA CRÈME PROTECTRICE

Crème de protection cutanée longue durée recommandée sur peau saine pour éviter l'irritation liée à l'incontinence (selles et urine), aux effluents corporels, à la transpiration... Semi-perméable, elle laisse parfaitement respirer la peau. Elle hydrate les peaux sèches sans compromettre l'adhérence des sparadraps ou des pansements adhésifs.



LA BONNE PRESCRIPTION

POUR L'ACHAT D'UN MATELAS

- Date
...../...../.....
- Achat d'un matelas en..... :
(à compléter en précisant la matière et la classe). Liste des classes page 50

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.




RISQUE NUL : CLASSES IA ET IB

Pas de facteur d'altération de l'état général. Situation d'alitement de quelques jours, le patient se mobilise seul sans problème. Évalué en dessous des seuils de risque des échelles validées. Un simple matelas clinique est nécessaire.

MATELAS MOUSSE

Matelas clinique de densité 37 kg/m³, disponible avec housse enduction polyester PVC bleu ou housse Pharmatex coloris vert. 2 hauteurs disponibles (12 ou 15 cm).

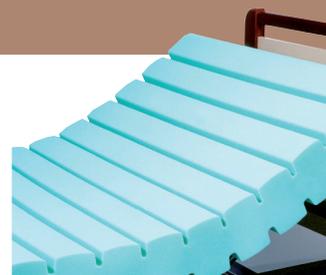

MATELAS MOUSSE

Allègement de la pression et répartition uniforme sur toute la surface de contact, noyau traité biocide. Housse amovible lavable à 95°C, traitée antibactérien.



MATELAS MOUSSE

Découpé en mousse viscoélastique 80 kg/m³, collé sur base en mousse HR articulée 37 kg/m³. Dimensions 90 x 195 x 14, housse Cartex.



RISQUE MOYEN : CLASSE 2

Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures. Dans ce cas il est préconisé de choisir un support adapté :

MATELAS MOUSSE

Couche supérieure en mousse viscoélastique 80 kg/m³, support en mousse HR 25 kg/m³. Housse Pharmatex fermeture à glissière 3 côtés avec rabats.



MATELAS MOUSSE

Couche supérieure mousse HR 43 kg/m³. Couche inférieure mousse HR 35 kg/m³. Housse Pharmatex, fermeture glissière 3 côtés avec rabats.



MATELAS MOUSSE

Ensemble surmatelas avec matelas simple intégré pour un allègement et une répartition optimum des points de pression. Densité de 85 kg/m³. Disponible en 3 duretés différentes : en dureté standard, dureté pour poids supérieur à 120 kg ou inférieur à 50 kg.




MATELAS MIXTE

Matelas moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme avec insert anatomique au niveau sacré. Livré avec deux modules amovibles : module en mousse visco à faible portance et module Air - Polyair, pour un positionnement aux talons ou sur la région sacrée selon l'état du patient.



MATELAS MOUSSE

Matelas mousse HR multiportance monobloc, associé à un module Air pour une prévention accrue sur une zone localisée.

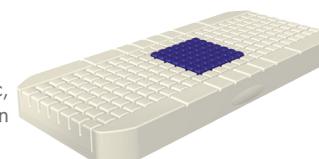

RISQUE ÉLEVÉ : CLASSE 3

Patient non levé dans la journée, état général mauvais et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent. Dans ce cas reha team vous propose des supports de haute qualité, conçus dans des matériaux novateurs.

SURMATELAS MIXTE

Surmatelas à air à cellules pneumatiques PVC, insert partie tête en mousse viscoélastique 50 kg/m³, base en mousse 28 kg/m³. Protection Cartex.



SURMATELAS AIR

Surmatelas à air à basses pressions alternées, composé d'un compresseur avec microprocesseur intégré (fonction auto-adjust) et d'une housse amovible avec enduction PU.



LA BONNE PRESCRIPTION

SURMATELAS À AIR STATIQUE

ACHAT

- Date/...../.....
- Achat d'un compresseur réglable en pression avec son surmatelas à air + support mousse de 6 cm.
- Achat d'une housse.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD

LOCATION

- Date/...../.....
- Location d'un surmatelas à air dynamique avec compresseur réglable en pression pour surmatelas à pression alternée :
- Durée de la location :
- Achat d'un support mousse de 6 cm.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD


LA PRISE EN CHARGE DES MATELAS

- **Supports statiques, classe IA :**
Les supports de la classe IA se différencient par une prise en charge qui est assurée dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum par an.
- **Classe IB :**
Les supports de la classe IB se différencient par une prise en charge qui est assurée dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum tous les deux ans.
- **Classe II :**
Leur prise en charge est assurée dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum tous les trois ans.
- **Classe III :**
La prise en charge est assurée dans la limite d'un matelas ou surmatelas maximum tous les cinq ans.



L'ASSISE : LE COUSSIN

Il s'agit d'un élément souple destiné à être placé directement sous les fesses du patient assis sur un fauteuil. Le coussin peut améliorer le confort de l'assise. Comme les matelas, les coussins sont classifiés et sont choisis en fonction du risque d'escarre. Quel que soit le choix du coussin, il doit s'accompagner des autres mesures préventives classiques (mobilisation, nutrition, etc.) et des principes de base d'un bon positionnement au fauteuil : dossier, assise (hauteur, largeur et profondeur) et accoudoirs adaptés à la taille du patient, pieds correctement soutenus. La fonction d'ergonomie est très importante pour les patients.

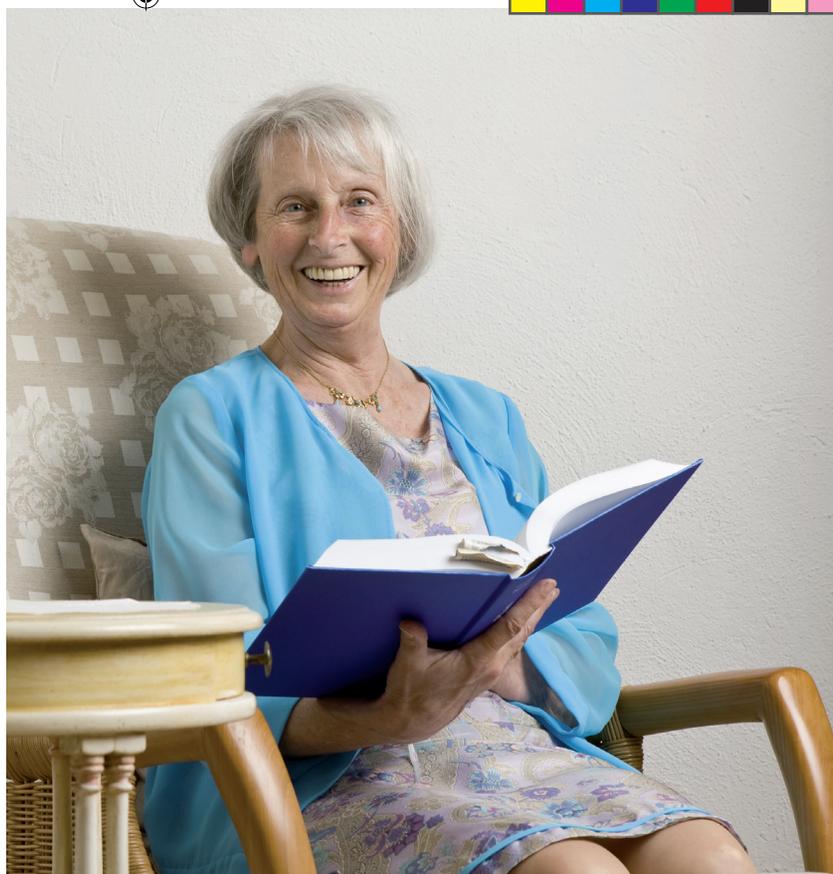

COUSSIN MOUSSE CLASSE II

Coussin moulé en matière viscoélastique pour utilisateurs de 30 à 200 kg. Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant. Décharge sacro-coccygienne.




COUSSIN MOUSSE CLASSE II

Coussin avec galbe anatomique recouvert d'une housse Pharmatex imperméable et antimicrobienne. Mousse viscoélastique thermosensible. Hauteur 8 cm.



COUSSIN MIXTE CLASSE IB

Insert ischiatique en gel viscofluide Ureflow sur base mousse PU.

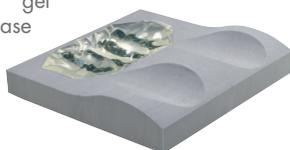

COUSSIN AIR NON RÉFÉRENCÉ LPPR

Coussin monocompartiment constitué de cellules connectées entre elles. Permet la libre circulation de l'air et s'adapte au mieux aux contours du corps.



COUSSIN MOUSSE CLASSE II

Coussin anatomique moulé en mousse viscoélastique 80 kg/m³ avec insert anti-poinçonnement. 7 tailles : 32 x 32 x 8 cm au 51 x 50 x 8 cm. Breveté.



COUSSIN AIR CLASSE II

Coussin à cellules pneumatiques bi-compartiments pour patients à risque élevé ou ayant constitué des escarres sacrées ou ischiatiques. Disponible en 2 hauteurs de cellules (6 cm / 10 cm) et en 17 tailles. Livré avec système de gonflage / manomètre et réglette pour un réglage personnalisé du dispositif. Renouvellement tous les 3 ans.



COUSSIN MOUSSE CLASSE II

Densité 85 kg/m³, dureté standard ou ferme suivant poids utilisateur. Livré avec 2 housses de haute qualité, base antidérapante.



LA BONNE PRESCRIPTION

POUR L'ACHAT D'UN COUSSIN

- Date/...../.....
- Achat d'un coussin en..... : (à compléter en précisant la matière et la classe). Liste des classes page 50.

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.



LA MOBILITÉ

Pour les personnes mobiles ou ayant gardé une partie de leur autonomie pour se déplacer eux-mêmes en fauteuil ou à pied, avec ou sans l'aide d'une tierce personne, reha team vous propose également une sélection de fauteuils roulants et d'appareils d'aide à la marche adaptés au rythme quotidien de vos patients.



sourire à la vie!

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

LES AIDES TECHNIQUES À LA MARCHÉ

POURQUOI MARCHER ?

Pour les patients l'objectif est double : Il y a d'abord un but de rééducation. Il est important que les patients gardent l'habitude de marcher tant que leur condition physique le leur permet. La marche permet de lutter contre la décalcification, est bénéfique pour la circulation, évite la fonte des muscles... Le deuxième objectif est de permettre au patient de garder un certain équilibre moral. Le fait de marcher doit rester un plaisir pour le patient, et non une corvée. Pour cela, il y a différentes aides à la marche :



LA CANNE

Indications : Perte d'équilibre, hémiplegie, port de prothèse, pathologies du membre inférieur.

Elle permet de se déplacer en toute confiance et repérer l'environnement, agissant comme un nouvel organe sensoriel. Les cannes sont proposées en bois, en métal, en version standard ou pliante, avec poignée en T ou anatomique.

(bambou ou hêtre) vernies, poignées courbées ou en «T».



LA CANNE SPÉCIFIQUE POUR ARTHRIQUE

Avec gouttière garnie mousse.

LA CANNE SPÉCIFIQUE TRIPODE

Réglable en hauteur.

LA CANNE SPÉCIFIQUE SIÈGE

Canne-siège pliante à 3 pieds avec poignée ergonomique



PRATIQUE, LES ACCESSOIRES QUI PERMETTRONT À VOTRE PATIENT DE POSER LEUR CANNE TEMPORAIREMENT, SANS QUE CELLE-CI NE TOMBE.



LE CADRE DE MARCHÉ

C'est un cadre à quatre pieds qui permet au sujet de marcher tout en gardant un bon équilibre.

Cadre de marche fixe à hauteur réglable de 80 à 90 cm, largeur 60 cm, finition époxy couleur. Poids maximum utilisateur 130 kg.



LE ROLLATOR

C'est un appareil de déambulation à roues, qui peut être équipé d'un siège et ou d'un panier.

LE ROLLATOR 2 ROUES

Existe en 5 tailles. Hauteur réglable à partir de 53 cm, et pouvant aller sur la taille 5 jusqu'à 101 cm. Pliable, manettes de réglage indexées. Garantie 1 an.

Taille standard.



LE ROLLATOR 3 ROUES

Pliant et léger, roues haute qualité pour tout type de terrain. Panier, grande pochette souple et plateau de série. Système de freinage par câbles.



LE ROLLATOR 4 ROUES

Déambulateur pliant quatre roues avec système de freinage renforcé et poignées ergonomiques très simples d'utilisation. Grandes roulettes pour faciliter les déplacements en extérieur, large espace d'assise.



LE ROLLATOR 2 ROUES

Compact, pliant et confortable avec assise rembourrée. Poignées ergonomiques réglables en hauteur de 74 à 100 cm. Panier souple s'accrochant par boutons pression (en accessoire).



POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT : LE ROLLATOR DEUXIÈME GÉNÉRATION



Rollator disponible dans plusieurs gammes de confort, alliant look moderne et facilité d'utilisation. La version de base propose notamment la fonction « mémoire », tandis que la version premium plus est équipée du système d'alarme Led, du changement de roues et d'un sac à courses robuste.

LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UNE LOCATION

- Date/...../.....
- Location d'un cadre de marche
Durée de location

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

POUR UN ACHAT

- Date/...../.....
- Achat d'un cadre de marche

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.



LES FAUTEUILS

reha team peut équiper vos patients en fauteuils roulants, qu'il s'agisse de modèles standard, actif, médium actif, confort, enfant ou sport. Manuels ou électriques, nos techniciens sont formés pour proposer, faire essayer, régler et réparer le modèle qui correspondra au mieux aux besoins de votre patient.



CHOISIR LE BON FAUTEUIL POUR VOTRE PATIENT :

Vous devez avant tout prendre plusieurs paramètres en considération :

sa pathologie • sa morphologie • l'environnement architectural • l'environnement humain • son mode de vie

LE FAUTEUIL MANUEL, si votre patient peut se déplacer seul en fauteuil

SÉCURITÉ ET MANIPULATION AISÉE

Fauteuil standard en aluminium résistant, se déclinant en version dossier fixe, inclinable ou cassant mi-hauteur. Nombreuses options.



FIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

Fauteuil léger avec châssis modulable, fourches réglables en angle, et palier. Nombreuses options.



Découvrez les dernières nouveautés fauteuils roulants manuels en flashant ce QR code



TECHNIQUE ET MODULARITÉ

Fauteuil pliable, fonctionnel et compact, pour utilisateur actif et dynamique. Nombreuses fonctionnalités et coloris disponibles. Ces modèles conviennent aux patients paraplégiques.



MANTIENT ET CONFORT

Fabriqué spécialement pour l'intérieur, le fauteuil de confort dispose de nombreux accessoires destinés à optimiser la posture et le confort du patient. Les diverses possibilités de réglage, les options spécifiques et les différentes configurations possibles selon les modèles, permettent une installation optimale du patient. Ces fauteuils sont aussi idéalement adaptés pour le repos en extérieur.



L'ASSISE DE POSITIONNEMENT ASSURE UNE MEILLEURE DISTRIBUTION DE LA PRESSION, UNE STABILITÉ, UN MANTIENT ET UN CONFORT OPTIMUM.

Elle est personnalisée et conçue en fonction des nécessités cliniques et des exigences des utilisateurs, qui ont des besoins de positionnement modérés à très importants, ou évolutifs. Elle peut être préconisée à titre préventif pour éviter les déformations orthopédiques liées à des asymétries.

LA BONNE PRESCRIPTION

- Date
...../...../.....
- **Siège de série modulable et évolutif, adaptable aux mesures du patient**
Siège de série modulable et évolutif, tout modèle et adjonctions.



La prise en charge est subordonnée à une prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie, chirurgie orthopédique. Elle est assurée dans la limite maximale d'une attribution tous les trois ans.

LE FAUTEUIL POUR HÉMIPLÉGIQUE

Fauteuil roulant léger, avec châssis intégralement en aluminium et DMC réversible à démontage rapide. Il est possible d'y intégrer une gouttière de positionnement avec rotateur.



LE FAUTEUIL DE TRANSFERT

Légers et compacts, ils sont en général pliants et munis d'un châssis aluminium. Ils sont très maniables par l'utilisateur et par une tierce personne.



UTILISATION OCCASIONNELLE

LE FAUTEUIL GRANDE LARGEUR

Pour vos patients souffrant d'obésité, reha team vous propose des fauteuils dont la largeur d'assise est élargie et adaptée à la morphologie de votre patient. Ce modèle est pliant en aluminium à double croisillon et est équipé d'une assise et d'un dossier anatomiques. Roues arrière renforcées, poids maximum de 200 kg.



LE FAUTEUIL SPORT

Pour vos patients pratiquant un sport de haut niveau ou la compétition, reha team équipe, règle et propose un SAV sur des fauteuils de sport spécifiques et techniques. Il existe des produits dédiés aux sports de haut niveau, collectifs ou individuels, mais également aux sports amateur.



BON À SAVOIR : Votre patient peut se renseigner au préalable auprès d'un club sportif afin de devenir licencié. Avant de s'équiper le club sportif lui proposera de faire des essais de matériel.

La prise en charge est assurée pour les personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive occasionnelle ou régulière (y compris à titre de loisir.)

LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UNE LOCATION

- Date
...../...../.....
- Location d'un fauteuil roulant manuel
Durée de location
- Préciser les accessoires : 1 ou 2 ou plus de 2
 - Repose-jambe droit
 - Repose-jambe gauche

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

POUR UN ACHAT

- Date
...../...../.....

La prescription détermine le montant du remboursement par la sécurité sociale, le libellé est très important, détaillez toutes les options figurant sur la LPPR.

N'hésitez pas à prendre contact avec un conseiller reha team.

- Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant ou cadre rigide, équipé de (option) :
 - dossier fixe
 - dossier inclinable
 - dossier cassant
- Accessoires :
 - repose-jambe relevable droit et ou gauche avec palettes articulées
 - appui-tête
 - coussin de dossier
 - gouttière hémiplégique
 - support moignon
 - tablette
- Achat d'un coussin de prévention d'escarres (voir page 24)
.....
- Date
...../...../.....
- Achat d'un fauteuil roulant de confort à dossier inclinable
Avec coussin de dossier, appui-tête et repose-jambe réglables en inclinaison
Avec coussin d'assise de confort ou coussin prévention d'escarres classe II
- Achat d'une tablette amovible (option : cale-tronc)



PENSEZ À PRESCRIRE UN COUSSIN DE PRÉVENTION D'ESCARRES SI NÉCESSAIRE, VOIR EN PAGE 24

LES FAUTEUILS ÉLECTRIQUES, pour les patients ne pouvant pas se propulser seuls

Ils se déclinent généralement en quatre catégories : les modèles adaptés à un usage principal en extérieur, ceux adaptés à un usage principal en intérieur, ceux qui sont adaptés à un usage mixte et les tout-terrain. Le choix s'établit en fonction des activités, des attentes du patient et de l'environnement architectural.

LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE D'INTÉRIEUR

Fauteuil à double croisillon compas avec assise planche et coussin mousse réglable en inclinaison. Toile de dossier réglable en tension, dossier inclinable 30°. Commande escamotable programmable, roulettes anti-bascule et nombreuses autres caractéristiques.



LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE MIXTE

Fauteuil à roues motrices arrière qui permet les déplacements à l'extérieur tout en étant flexible et maniable à l'intérieur. Sa faculté à contourner les obstacles offre une grande accessibilité dans tous les environnements. Système modulaire s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur.



LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE D'EXTÉRIEUR

Fauteuil permettant d'accéder à une vie active. Assise multi réglable, hauteur sol-siège mini de 40 cm avec lift. L'inclinaison du dossier à translation apporte confort et positionnement.



BON À SAVOIR : Les fauteuils électriques se déclinent en version AP1* ou AP2*. La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai effectué par une équipe pluridisciplinaire, constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute. Le médecin fournit un certificat attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient, précisant que ses capacités lui permettent d'en assurer la maîtrise et mentionnant les caractéristiques que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement le type d'assise ainsi que le type de commande. Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil. La prescription d'un renouvellement à l'identique peut être faite par un médecin généraliste.

LA BONNE PRESCRIPTION

- Date/...../.....
- Achat d'un fauteuil roulant électrique AP1 OU AP2 + options particulières (commande tierce personne, commandes spécifiques etc.)

* AP1 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accoudoirs, dossier, réglables avec platines crantées.

* AP2 : Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique et appui-tête.

LES BIENFAITS DU FAUTEUIL VERTICALISATEUR

Permettre à votre patient de se positionner en station debout se révèle très bénéfique pour le fonctionnement de son corps. Une verticalisation d'une à trois heures quotidiennes maintient la santé osseuse des membres inférieurs, améliore le tonus musculaire et mobilise les viscères. Son organisme peut alors «souffler» grâce à une meilleure circulation au niveau du transit, du système veineux et des articulations. C'est aussi un moment propice à la vie sociale car son indépendance se trouve accrue.

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR ÉLECTRIQUE

Fauteuil à roues avant motrices, très polyvalent, permettant la verticalisation. Son assise modulable apporte un excellent confort optimisé par l'inclinaison électrique des repose-jambes, du dossier et de l'assise.

LE FAUTEUIL VERTICALISATEUR MANUEL


Fauteuil roulant verticalisateur manuel, à propulsion manuelle, de type actif. Son mécanisme unique d'assise permet de verrouiller la verticalisation au degré près. Véritable outil d'indépendance, robuste et facile à utiliser.

EXISTE EN FAUTEUIL MANUEL AVEC VERTICALISATION ÉLECTRIQUE



LE TRICYCLE, UNE ALTERNATIVE PLUS LÉGÈRE

Destinés à un usage urbain ou en balade, la nouvelle génération de tricycles sélectionnée par les professionnels reha team procurera de nombreux avantages à vos patients : un maintien du corps sécurisé, une rééducation assurée et la possibilité de se rendre facilement partout où ils le souhaitent.

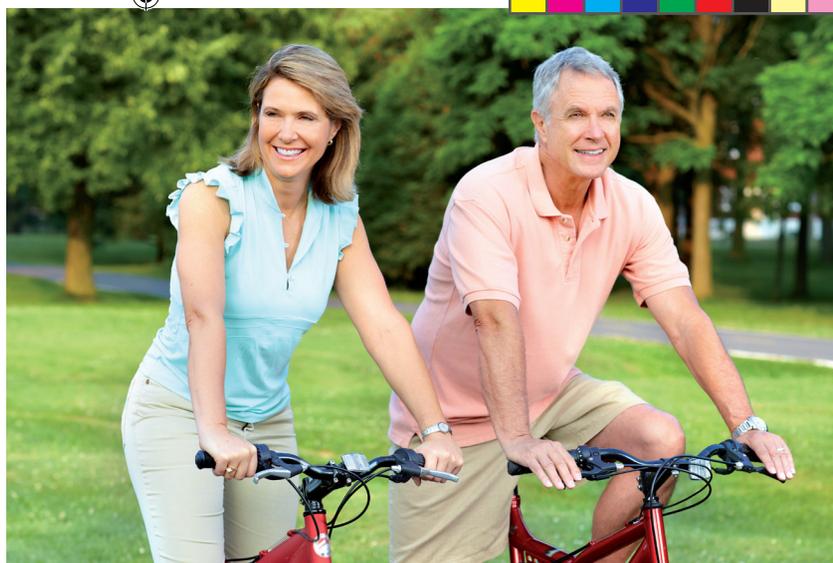

LE TRICYCLE À PIGNON FIXE

Tricycle adulte proposé en version standard avec pignon fixe (libre en option), frein à tambour intégré à l'axe de la roue avant, éclairage avant, arrière et différentiel. Possibilité d'adapter de nombreuses options et accessoires. Disponible en gris clair.



LE TRICYCLE PLIABLE

Tricycle de rééducation pliable avec trois roues rayonnées à démontage rapide, conçu pour apporter la solution du transport et du rangement. Options : Appui-dos complet, sabots, tuteurs réglables pour jambes, guidon cadre. Nombreux accessoires spéciaux. Disponible en quatre tailles.



LA BONNE PRESCRIPTION

La prise en charge est assurée pour les personnes qui, du fait d'une déficience motrice, acquise ou congénitale, ont une autonomie de marche réduite.

POUR UN ACHAT

- Date
...../...../.....
- Achat d'un tricycle
Options :
 Pliant

- Appui-dos
- Sabots
- Tuteurs de jambes
- Dérailleur

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

LES SCOOTERS

Le scooter est la solution intermédiaire au fauteuil électrique habituel. Esthétiques, spacieux et confortables, ces différents modèles, proposés par reha team, permettront à vos patients d'organiser leurs sorties. Nous sommes à leur disposition pour leur faire essayer dans nos magasins.

Scooter adapté aux utilisateurs en recherche de style et de confort dans un ensemble compact. Son châssis est équipé de suspension garantissant une conduite plus osée, tout en assurant une importante stabilité. Grandes roues et pneus à profil étroit facilitent le contrôle de la direction et la conduite sur des terrains accidentés.



LES SCOOTERS SE DÉCLINENT EN VERSION COMPACTE POUR L'INTÉRIEUR, CENTRE COMMERCIAL OU EXTÉRIEUR AMÉNAGÉ.

LA MOBILITÉ ENFANT

Le déplacement est un élément essentiel favorisant le développement personnel et l'intégration sociale de l'enfant. L'autonomie, la liberté de pouvoir jouer et se promener dans les mêmes endroits que ses camarades, de suivre une scolarité complète et d'accéder à toutes les pièces de la maison, favorisent largement son épanouissement. En parcourant les pages qui suivent, vous trouverez toutes les aides adaptées au handicap de vos petits patients.



LES POUSSETTES

Version « canne », à dossier inclinable ou évolutive, reha team propose des modèles de poussettes adaptés à la morphologie de l'enfant, tout en considérant les attentes des parents. Contrairement aux poussettes classiques, les modèles proposés par reha team assurent un positionnement optimal et un maintien efficace et sont conçus pour une utilisation régulière.

LA POUSSETTE DE TYPE CANNE

Équipée de repose-pieds réglables indépendants et escamotables, cette poussette est robuste et durable. Mécanisme de pliage breveté, assise extensible en profondeur, 4 roues increvables.



LA POUSSETTE À SUSPENSIONS

Poussette permettant de diminuer l'intensité des secousses sur terrains accidentés. La suspension de l'assise est réglable en fonction du poids de l'utilisateur. L'assise s'adapte individuellement aux proportions du corps de l'enfant. De multiples cales et systèmes de fixation sont disponibles. Unité d'assise et châssis dissociables.



Pour en savoir plus sur la mobilité enfant, flashez ce QR code.

LA POUSSETTE ÉVOLUTIVE

Poussette 3 roues multiréglable (dossier, assise et repose-jambes inclinables) et évolutive (assise réglable en largeur et profondeur, dossier réglable en hauteur). Pour enfants de 6 mois à 6 ans. Grand choix de coloris possible.



LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UN ACHAT

- Date
...../...../.....
- Achat d'une poussette :
 Standard
Ou Dossier inclinable
Ou Multiréglable évolutive
- Taille :
.....
- Accessoires :
 Appui-tête
 Cale d'abduction

- Accessoires :
 Sangles d'abduction
 Cales latérales de corps
 Harnais
 Tablette
 Rallonge de dossier
 Freins à tambour
 Support appareil de ventilation assistée
 Accoudoirs
 Roues gonflables

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD

LES SIÈGES AUTO

Reha team propose à vos petits patients, des sièges de voiture adaptés à la morphologie et au handicap de l'enfant, spécialement conçus pour le maintien optimal et l'évolution en fonction de son rythme de croissance.

SIÈGE JUNIOR-ENFANT

Pour enfants dont le poids est de 15 à 36 kg. Appui-tête réglable en hauteur, coussinets adaptables, hauts-parleurs intégrés pour lecteur de MP3. Housses à démontage facile et lavables en machine à 30°. Embase pivotante en option.



SIÈGE AUTO MODULABLE

Siège auto modulable et évolutif, disponible en deux tailles, pour enfants de 1 m à 1,60 m. Assise pivotante côté droit véhicule avec harnais 5 points de série et passage sangle véhicule.



LA BONNE PRESCRIPTION

- Date/...../.....
 - Achat d'un siège modulable et évolutif
- Options :
- Plot d'abduction
 - Cales latérales
 - Appui-tête multiréglable

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

DÉAMBULATION ET VERTICALISATION

Les aides au déplacement sont conçues de façon à optimiser la rééducation de l'enfant, et s'adaptent à leur morphologie. Elles assurent parfaitement stabilité et sécurité.

APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION ET DE DÉAMBULATION

Permettant la mise en station debout et la rééducation progressive de la marche. Tablette et inclinaison du mât réglables. Quatre tailles disponibles.



APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION ET DE DÉAMBULATION

Pour enfants de 18 mois à 14 ans. Large base roulante assurant stabilité et sécurité. Disponible en quatre tailles.



DÉAMBULATEUR INVERSÉ

Une aide à la marche qui est positionnée derrière le corps de l'enfant et qui est ouverte dans le sens de la marche. Ceci soutient le dos droit et l'enchaînement naturel de mouvements permettant de favoriser les fonctions du corps existantes. Il facilite l'accès aux activités.



COMPAGNON INDISPENSABLE, LE TRICYCLE

Pouvoir déambuler de façon autonome est une faculté qui manque à certaines personnes. En outre, le fait de pouvoir bouger et faire du vélo est souvent un élément important dans le processus de rééducation. C'est pourquoi il existe toute une gamme de tricycles pour enfants, équipés de façon à améliorer les déplacements de vos patients. reha team a sélectionné ses tricycles sur des critères de fiabilité et de sécurité. Légers, pratiques et esthétiques, ces petits compagnons deviendront vite indispensables pour tous les périples quotidiens des enfants.

LE TRICYCLE À PIGNON FIXE

Tricycle à pignon fixe, guidon réglable avant-arrière et hauteur, frein à étrier. Cinq tailles disponibles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur. Nombreuses options. Nombreux accessoires disponibles.



Tricycle à pignon fixe, guidon réglable avant-arrière et hauteur, frein à étrier. Cinq tailles disponibles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur. Nombreuses options.



LA BONNE PRESCRIPTION

POUR UN ACHAT

• Date
...../...../.....

• Achat d'un tricycle

Options :

- Pliant
- Appui-dos

Sabots

Tuteurs de jambes

Dérailleur

Préciser si la prescription est en rapport avec une ALD.

PORTE-COQUILLE

La mobilité où que l'on aille : le châssis pour coquilles ou systèmes d'assises est facile à manœuvrer en intérieur. En extérieur, vous le poussez sans effort sur tous les sols.



LES FAUTEUILS

reha team propose et conseille les parents et vos petits patients sur les fauteuils les mieux adaptés aux différentes activités des utilisateurs et leurs besoins précis. L'objectif étant de trouver le meilleur compromis pour préserver l'indépendance de l'enfant et pour faciliter l'accompagnement des parents.

LE FAUTEUIL POUSSETTE POUR LES TOUT-PETITS

Fauteuil ultraléger évolutif. Matériaux légers, maniement simple et design agrémenté de couleurs vives. Formes rondes et agréables, les enfants se sentent bien, les parents sont soulagés et l'intégration est plus facile. Siège indépendant du châssis et réglable individuellement. Largeur d'assise de 18 à 32 cm.



PUISSANCE ET ÉNERGIE

Fauteuil à roues motrices centrales, offrant des performances exceptionnelles grâce à son rayon de rotation ultra-compact (60 cm) et son faible encombrement. Une largeur hors tout de 60 cm et une hauteur d'assise basse facilitent le passage dans des espaces exigus. Ses performances en extérieur avec son système unique de suspension procurent une conduite tout en souplesse, stable et sûre. Franchissement d'obstacles jusqu'à 7,5 cm, autonomie 26 km.



LE FAUTEUIL ACTIF POUR LES ENFANTS DYNAMIQUES

Fauteuil disponible en deux versions : standard ou évolutive, pour s'adapter parfaitement aux différents besoins des enfants. Ce fauteuil léger grâce à son châssis en aluminium est disponible avec un dossier fixe, inclinable par crémaillère ou pliant à mi-hauteur. Il est très facilement transportable.



OUI À LA VERTICALISATION

Fauteuil associant verticalisation, multipositionnement assis/couché/debout, lift et déplacement électrique. Permet de mobiliser l'enfant sans aucun cisaillement. Roues motrices centrales lui permettant de pivoter sur lui-même en intérieur exigü. Grande capacité de franchissements.





LES AIDES TECHNIQUES AU QUOTIDIEN

Les aides techniques sont des outils, dispositifs ou moyens qui permettent de retrouver une partie de l'autonomie perdue à cause des aléas de l'âge ou de la vie. Leur rôle est de pallier les déficiences et de remplacer une fonction perdue non compensable. Grâce à ce chapitre, vous pourrez orienter vos patients vers les meilleurs produits.



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

DANS LA CUISINE

Quand l'appétit est dépassé par le handicap, c'est bien souvent la frustration qui prend le dessus. Cependant, il existe une multitude d'aides techniques simples et efficaces, qui rendront à vos patients une partie de l'autonomie perdue. Cuisiner sans contrainte, se régaler et profiter de la vie est tout à fait possible grâce à ces accessoires que vous pouvez leur conseiller, disponibles dans nos magasins reha team.

BIEN PROTÉGÉ

Bavoir 50 x 80 cm, face absorbante en polycoton gratté. Fermeture par bouton-pression. Taille unique.



LE REBORD D'ASSIETTE

En polyéthylène léger et flexible, ce rebord s'adapte sur n'importe quelle assiette plate.



LE COUTEAU-FOURCHETTE

Ce couteau est composé d'un bord tranchant avec à son extrémité des dents de fourchette. En acier inoxydable, manche compensé pour une meilleure préhension. 2 en 1.



LE Gobelet DÉCOUPE NEZ

Verre destiné aux personnes ayant des difficultés à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque.



L'ASSIETTE MANOY

Assiette à fond incliné, idéale pour les personnes ne se servant que d'une seule main. Passe au lave-vaisselle.



LA CUILLÈRE BOUCLE

Cuillère avec boucle facilitant la préhension des jeunes enfants. Garantie lave-vaisselle.



LES COUVERTS COUDÉS

Pour droitiers et gauchers, permettant de porter les aliments à la bouche en cas de perte d'inclinaison radiale du poignet.



LE Gobelet CARING

Gobelet transparent avec poignées ergonomiques et couvercle pipette. Passe au micro-ondes.



REDONNEZ LE GOÛT ET LE PLAISIR DE CUISINER ET MANGER EN TOUTE LIBERTÉ À VOS PATIENTS GRÂCE À DES AGENCEMENTS AD HOC

En effet, tout comme la salle de bain (voir pages suivantes), la cuisine peut être organisée à la hauteur souhaitée de façon à donner accès à votre patient aux différents appareils et ustensiles sans difficulté.



CÔTÉ SALLE DE BAINS

La toilette est l'un des moments privilégiés de la journée, où l'on prend son temps pour se laver, se préparer et chouchouter son corps. Le handicap ne doit pas être une entrave à cet instant de douceur et de détente. reha team a sélectionné des produits spécifiquement adaptés aux besoins de vos patients, afin qu'ils puissent effectuer les gestes quotidiens avec simplicité, sécurité, et préserver leur bien-être.

LES BARRES D'APPUI

À proximité des toilettes et du lavabo, dans la douche ou la baignoire, elles aident votre patient à se tenir et à se positionner correctement. Sobres ou colorées, elles s'effacent ou s'affichent selon ses souhaits.



LE SIÈGE DE BAIN PIVOTANT

Siège de bain pivotant pour baignoire, en plastique ABS haute résistance. Assise et dossier ergonomiques, système de rotation sécurisée 360°.



SOUS CERTAINES CONDITIONS, CES AIDES TECHNIQUES PEUVENT BÉNÉFICIER DE FINANCEMENT PAR LA PCH OU L'APA (À LA FIN DE CE GUIDE PAGES 52-53).



LA PLANCHE DE BAIN

Planche de bain, longueur 69 cm, adaptable sur la plupart des baignoires grâce à ses 4 patins de fixation. Existe en version XXL, de longueur 74 cm.



L'ADAPTATION DE LA SALLE DE BAINS

reha team peut équiper et adapter la salle de bains de votre patient en fonction de son handicap. Installer un élévateur de bain ou une baignoire à porte suppose un investissement plus lourd, mais une prise en charge partielle est possible grâce à la Prestation de Compensation Handicap (voir page 52). Nos conseillers reha team peuvent faire le point avec votre patient afin de lui proposer la solution la mieux adaptée.

LA BAIGNOIRE À PORTE

Baignoire à porte dont une partie du fond est moulée en siège pour permettre de prendre le bain en position assise. Large porte latérale équipée d'un système de verrouillage simple et sécurisé pour l'étanchéité.



L'ÉLÉVATEUR DE BAIN

Élévateur de bain avec dossier et appui-tête intégré inclinable jusqu'à 40°. Démontable en deux parties, fonctionne avec batteries incluses dans la télécommande. Revêtement déhoussable et lavable. Existe en version XL poids maxi 170 kg et avec maintiens latéraux.



POUR LES ENFANTS

Vous pouvez également conseiller certains produits spécifiques destinés à faciliter la toilette des enfants et protéger le dos des parents.

LE SIÈGE DE TOILETTE INCLINABLE

Siège modulable pour les toilettes, la douche, conçu pour enfants de 2 à 13 ans. Nombreux réglages et accessoires de maintien. Livré avec coussin interne imperméable et repose-pieds. Disponible en quatre tailles.



LE TRANSAT DE BAIN

Répond aux attentes du confort de l'enfant et des personnes l'accompagnant. Conçu en aluminium, ce transat de bain est léger et solide. Son système d'inclinaison à plusieurs points le rend pratique et confortable. Appui-tête, ceinture et maintien des chevilles réglables et amovibles.



LA BONNE PRESCRIPTION

- Date/...../.....
- Achat d'un transat de bain
Options :
 - Appui-tête
 - Plot d'abduction

LES ACCESSOIRES

Il existe toute une gamme d'aides techniques destinées à améliorer le quotidien de vos patients. Simples et pratiques, orientez-les vers l'essentiel.

LA PROTECTION DE DOUCHE

Jambière de douche imperméable et hermétique. Évite l'eau et le savon sur les plaies, pansements, plâtres et appareillages.



LA SANDALE DE DOUCHE

Sandale permettant de nettoyer le pied entier sans se baisser. Facile à utiliser, il suffit de fixer les ventouses présentes sous la brosse au sol de la baignoire ou de la douche, d'appliquer du savon et de rincer le pied tout en frottant d'avant en arrière.



LA BROSSÉ À ORTEIL

Brosse à orteils munie d'un long manche pour se laver sans se baisser.



LES ACCESSOIRES À LONGS MANCHES

Accessoires de toilette à longs manches. Permettent une toilette sans effort.



LES TOILETTES

L'accès aux toilettes peut être gêné par un handicap temporaire ou permanent. reha team est à disposition de vos patients pour trouver l'alternative la plus adaptée.



LE REHAUSSE-WC CONFORT

Très agréable au toucher et confortable, ce surélévateur de toilettes en mousse injectée. Facilite le positionnement lorsque la station assise est difficile. Souplesse de la mousse, contact agréable et étanchéité complète. Disponible avec ou sans couvercle.



LE SURÉLÉVATEUR DE WC

Modèle compatible avec tous les WC courants. Rehausse les WC de 10 cm en se posant simplement sur la cuvette. Butée avant et deux coales latérales. Poids maximum supporté 225 kg. Montage sans outils.



LA CHAISE GARDE-ROBE

Conçue pour apporter plus de confort et de fonctionnalités. Réglable en hauteur. Seau anatomique escamotable par le côté et par le haut. Différentes configurations possibles : classique, ajustable en hauteur, pliante et mobile. Plusieurs coloris au choix (lavande, bleu, vert et terra-cotta). Poids maximum 130 kg.



LE SIÈGE TOILETTE /DOUCHE

Chaise de douche et de toilettes réglable en hauteur sans outil, munie d'accoudoirs escamotables vers le haut et repose-pieds amovibles et escamotables. Équipée d'un seau cette chaise bénéficie d'un remboursement LPPR.



L'AUTONOMIE

Quand les mouvements de la vie quotidienne deviennent compliqués, vous trouverez dans cette rubrique les accessoires nécessaires pour faciliter les gestes simples et retrouver une certaine autonomie.



LA LOUPE

Loupe à utiliser à la main ou suspendue au cou grâce à une cordelette. Idéale pour les travaux de lecture et de couture.



LE COUPE COMPRIMÉS

Permet de casser les comprimés en 2 et de les stocker.



LE SET À LONGS MANCHES

Pratique, la balayette et la pelle à long manche pour nettoyer sans se baisser.



LES PINCES DE PRÉHENSION

Quand un objet est tombé ou est éloigné, ces pinces permettent par un simple appui sur la gâchette de prendre l'objet et le ramener à soi.

Ce modèle inclut un aimant à son extrémité, un crochet pour aider à l'habillage, un clip de fixation pour permettre à la pince d'être clipsée sur une canne ou un cadre de marche.



L'ENFILE BAS DE CONTENTION

Le chausse-bas aide à résoudre le problème fréquent de l'enfilage des bas de contention. Son utilisation est simple et permet d'économiser du temps et beaucoup d'efforts.



LE CHAUSSE-PIED

Pour se chausser sans se baisser.



L'ENFILE BOUTON

Une extrémité pour boutonner, l'autre pour coulisser une fermeture éclair.



L'HABILLEMENT

Chez reha team, vos patients trouveront des chaussures de confort pour les pieds sensibles et des vêtements de nuit facile à enfiler. Nos conseillers sont à leur écoute pour leur présenter toute une gamme pratique et séduisante.



CHAUSSURES ET CHAUSSONS DE CONFORT

Spécialement étudiés pour les pieds les plus sensibles. Chez reha team, vos patients seront agréablement reçus pour des essayages et des conseils personnalisés.



GRENOUILLÈRES

De nombreux modèles en différents coloris sont proposés à vos patients pour leur garantir un maximum de confort.





L'HYGIÈNE ET LE CONFORT

Globalement, les troubles de la continence urinaire représentent un motif important de consultations en médecine, car ils touchent toutes les tranches de la population. D'origine neurologique, traumatique ou chirurgicale, rétention et incontinence aboutissent aux mêmes servitudes quotidiennes. Le facteur social et la prise en compte de la personnalité sont des éléments importants à intégrer pour conseiller au mieux votre patient. Les conseillers reha team reçoivent également vos patients dans un espace dédié, afin de préserver leur dignité. Dans cette rubrique, vous trouverez des conseils, des idées pratiques et toute une sélection des meilleurs produits proposés par reha team.



sourire à la vie!

Qualité & Performance
Matériels et aides techniques personnalisés

INCONTINENCE LÉGÈRE/MODÉRÉE

TENA Lady

Protections féminines pour fuites urinaires. Discrète et confortable, c'est la protection qui vous accompagne en toutes circonstances. Tena.



TENA Men

Protections masculines pour fuites urinaires légères. Très discrètes, elles passent inaperçues sous un pantalon. Existent en deux absorptions. Tena.



MOLIMED FOR MEN

Protections masculines en forme de coquille pénienne avec triple coussin absorbant. Hartmann.



TENA Pants Discreet

Culottes absorbantes jetables 100% respirantes. Discrète et confortable, la protection s'utilise comme un sous-vêtement. Convient aux hommes et aux femmes. Tena.



ID ANAMINI

Protections anatomiques et absorbantes spécialement conçues pour l'incontinence urinaire légère de la femme. Existe en cinq absorptions. Ontex.



CONFIANCE SENSITIVE

Protection anatomique 100% micro-aérée, constituée d'un triple coussin pour une absorption immédiate. Neutralise les odeurs. Hartmann.



ID SLIPACTIV

Sous-vêtements absorbants pour personnes mobiles. Discrétion optimale et maintien parfait. Ontex.



PROTECTIONS DE LITERIE

Alèses de différentes dimensions pour la protection des lits et fauteuils. Matelas en pulpe très absorbant et voile en non-tissé doux au toucher. Absorption rapide. Différentes dimensions.



Alèse de lit ou fauteuil triple épaisseur, lavable plus de 250 fois. Disponible en plusieurs dimensions.

Gamme imperméable dotée d'un matelas plus absorbant grâce à la technologie SecureZone. La structure du matelas associée au super-absorbant renforce la sécurité antifuites. Surface en non-tissé. Aspect textile, confortable et doux pour la peau.



INCONTINENCE MODÉRÉE/FORTE

ID SLIP

Changes complets au toucher "textile" pourvus de barrières anti-fuites pour l'incontinence moyenne à très forte. Ontex.



TENA Pants

Culottes absorbantes jetables 100% respirantes, pour un plus grand confort cutané. La protection s'enfile et se retire comme un sous-vêtement ; parfaitement adaptée aux personnes mobiles et semi-mobiles. Existe en 3 absorptions et 4 tailles. Tena.



TENA Silhouette

Sous-vêtement féminin décoré absorbant. S'ajuste parfaitement à votre silhouette. Matière unique «douceur coton» et système Odour Control™, disponible en plusieurs tailles. Tena.



TENA Flex

Changes complets avec une nouvelle ceinture de fixation stretch garantissant un meilleur confort. Repositionnable à volonté. Le film extérieur, 100 % respirant, permet l'aération de la peau. Les doubles barrières anti-fuites permettent une sécurité anti-fuites optimale. Existe en 3 absorptions. Tena.



TENA Comfort

Protections anatomiques absorbantes destinées aussi bien aux femmes qu'aux hommes mobiles et semi-mobiles. S'utilise avec le sous-vêtement de maintien : Tena Fix. Disponible en 5 absorptions. Tena.



MOLICARE

Changes complets pour le jour et la nuit avec triple coussin absorbant et barrières anti-fuites. Hartmann.



MOLICARE MOBILE

Slips absorbants pour fuites modérées à fortes. Disponible en absorption jour et nuit. Hartmann.



LES SOINS AU QUOTIDIEN

TENA Cellduk : Boîte de 200 carrés nettoyants en cellulose.

TENA Wet Wipe : Boîte distributrice de 48 lingettes imprégnées; sans alcool.

TENA Soft Wipe : Boîte distributrice de 135 lingettes non imprégnées ; s'utilisent sèches ou mouillées pour une sensation ultra-douce.

TENA Wash Cream : Crème lavante sans savon; ne nécessite pas de rinçage.

TENA Wash Glove : Boîte de 200 gants à usage unique sans film protecteur.





PRÉVENTION, SÉCURITÉ, REMISE EN FORME ET RÉÉDUCATION

Pour le suivi médical des sujets sensibles, reha team s'engage à vos côtés afin de proposer les meilleurs produits à vos patients. Effectuer un suivi préventif régulier, c'est détecter les problèmes à temps, et préserver leur santé.

De même, pour la remise en forme après un traumatisme ou un accident, comme pour la musculation et l'entraînement sportif il est nécessaire d'utiliser des appareils et accessoires performants. L'acquisition du bien-être corporel de vos patients passe par la maîtrise du matériel utilisé. C'est pourquoi nous vous proposons une gamme de produits fiables et adaptés à chaque utilisation.



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ AU DOMICILE

Pour garantir la sécurité de votre patient dans son propre environnement, reha team est à sa disposition pour le conseiller et lui proposer des solutions adaptées en matière de diagnostic et de téléassistance.

LE TENSIOMÈTRE POIGNET

Tensiomètre électronique de poignet avec affichage simultané de toutes les valeurs diastole, systole, pouls et heure. Détection des pulsations irrégulières. 60 mémoires avec indication de la date et de l'heure de la prise de tension. Indicateur d'hypertension. Système « Intellisense » qui régule et adapte automatiquement la pression de gonflage nécessaire à une prise de tension confortable. Dispositif médical validé cliniquement.



LE TENSIOMÈTRE BRAS

Tensiomètre électronique au bras avec brassard médium (diamètre de bras de 22 à 32 cm). Détection des pulsations irrégulières : avec indication du résultat uniquement s'il est fiable. Large écran affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls. Système « Intellisense » pour un calcul de la tension pendant le processus de gonflage avec une pression adaptée. Nouveauté: indicateur du niveau d'hypertension. 60 mémoires avec indication de l'heure et de la date. Dispositif médical validé cliniquement.



LE THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Mesure précise, sans contact corporel, de la température (prise à environ 5 cm de distance). Permet également de mesurer la température ambiante, les liquides et les surfaces (plage de mesures de 0 °C - 100 °C). Mesure rapide, environ 1 seconde. Enregistre les 12 dernières mesures.



LE THERMOMÈTRE FLEXIBLE

Thermomètre étanche oral, rectal et axillaire, avec bip sonore et mémorisation de la dernière mesure. Garantie 3 ans.



SÉCURITÉ : PROPOSEZ LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE DE REHA TEAM

reha team propose deux solutions de téléassistance pour vos patients : reha team téléassistance et Filassist Contact Services. Deux offres spécifiques et complémentaires adaptées aux besoins de chaque personne.

LES TÉLÉPHONES

LE TÉLÉPHONE MULTIFONCTIONS

Téléphone amplifié avec appel d'urgence à distance grâce à deux télécommandes (pendentif ou bracelet) permettant de déclencher un appel d'urgence auprès de 6 numéros mémorisables. Mains-libres, grosses touches, flash lumineux de sonnerie. Facile à utiliser et idéal pour les personnes malentendantes.



LE TÉLÉPHONE ALARME À TÉLÉCOMMANDE

Téléphone convivial conçu pour communiquer simplement et en sécurité. Avec la télécommande du CarePlus, possibilité de répondre à distance au téléphone ou composer un appel d'urgence. Témoin lumineux de sonnerie clignotant lors de la réception d'un appel. Réglage du volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie. Message vocal d'alerte préenregistré, appel d'urgence et décroché à distance, 4 touches mémoire avec photos.



LE TÉLÉPHONE SANS FIL

Large touches faciles à utiliser, volume du combiné et de la sonnerie puissant, mains-libres. Large afficheur rétro-éclairé, grosses touches très lisibles. Touche d'amplification sonore procurant un son puissant et clair. De plus, la forme de son combiné facilite son raccroché sur sa base vraiment stable pour une meilleure sécurité.




NOS TÉLÉPHONES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME AUDIO +, ALLIENT UNE COMPATIBILITÉ OPTIMALE AVEC LES APPAREILS AUDITIFS, À UN NIVEAU D'AMPLIFICATION SUPÉRIEUR DES NIVEAUX SONORES. CES PRODUITS NE PRÉSENTENT PAS DE GÊNE OU D'INTERFÉRENCE POUR LES UTILISATEURS D'APPAREILS AUDITIFS.



LA REMISE EN FORME ET LA RÉÉDUCATION

L'activité physique régulière est source de bienfaits pour notre organisme, quels que soient nos aptitudes ou notre âge. Elle permet de limiter les facteurs de risques cardio-vasculaires, améliore la respiration, l'équilibre, la coordination, la force et la souplesse musculaire.

Forme physique et intellectuelle, moral au beau fixe, diminution du stress sont autant de bénéfices obtenus par ceux qui pratiquent une activité physique. Faites tester la qualité de nos matériels à vos patients, qui seront guidés par les conseillers reha team.

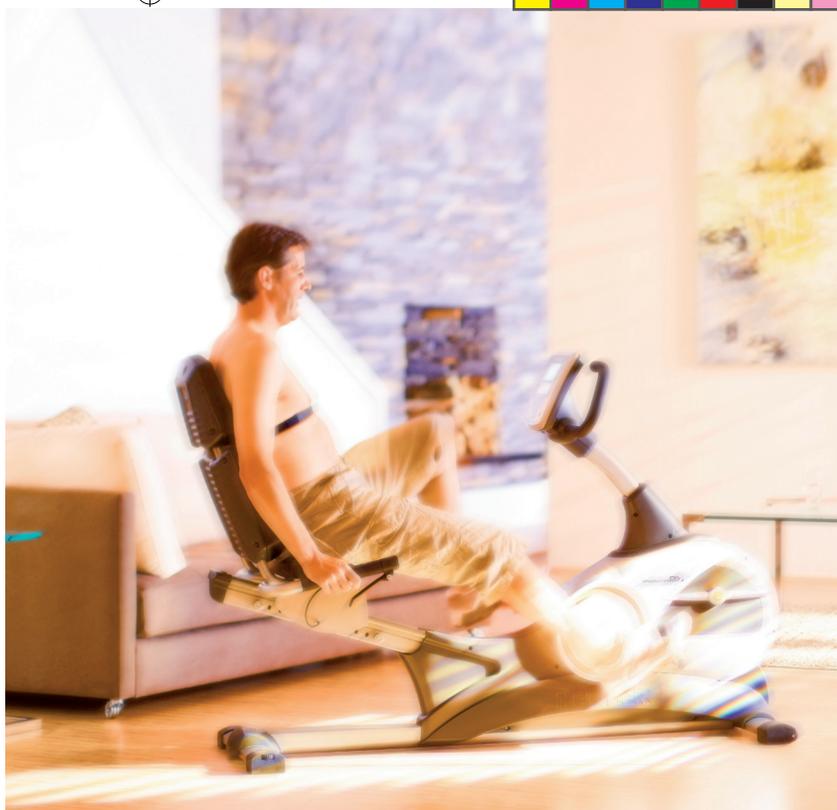

LE NEUROSTIMULATEUR TENS

La neurostimulation électrique transcutanée est une technique destinée à soulager la douleur neurologique à l'aide d'un courant électrique de faible tension transmis aux nerfs par des électrodes placées sur la peau.

Cet appareil est équipé de 7 programmes de traitement et 2 programmes libres à créer.

Livré avec chargeur et 4 piles rechargeables.



LE CARDIO-FRÉQUENCEMÈTRE

Cardio-fréquencemètre multisports disposant de la certification médicale et garantissant une mesure fiable de la fréquence cardiaque. Réglage automatique basé sur l'âge, réglage d'une zone cible manuelle, alarme sonore de dépassement, indicateur visuel de zone cible.



LE MINI PEDALLING

Appareil de fitness pratique pour de légers mouvements. La résistance de freinage est réglable sans à-coups. Permet de pédaler assis.



LES COMPRESSES

Utilisables à volonté et sans restriction, les compresses de lin permettent un traitement de la douleur et favorise la relaxation grâce à une production de chaleur ou de froid thérapeutique doux et progressif. Modèles disponibles : compresses universelles (46 x 33 cm) ou compresses cervico-scapulaires : (40 x 42 cm).



LE VÉLO

Vélo d'appartement permettant aux sportifs de tout âge, un entraînement de remise en forme régulier et bénéfique pour la santé. Seuil d'enjambement bas, palpeurs tactiles, volant d'inertie 7 kg.



LE TAPIS DE COURSE

Surface de marche/course généreuse à faible hauteur du sol, offrant une sensation très sûre. 8 programmes disponibles. Repliable après l'entraînement.



PRÉVENTION, SÉCURITÉ, REMISE EN FORME ET RÉÉDUCATION



NOS PAGES
PRATIQUES



sourire à la vie!

Qualité & Performance

Matériels et aides techniques personnalisés

LES DIFFÉRENTES CLASSES DE MATELAS PRÉVENTION D'ESCARRES

- 1A**
 - Matelas ou surmatelas en mousse avec découpe en forme de gaufrier
 - Matelas ou surmatelas à pression alternée
 - Matelas ou surmatelas mixte mousse et eau ou mousse et air
- 1B**
 - Matelas ou surmatelas à air statique ou à air motorisé
 - Matelas ou surmatelas en mousse à forte viscosité
 - Matelas ou surmatelas en mousse structurée formée de modules amovibles de densité et/ou à hauteur variable
- 2**
 - Matelas ou surmatelas en mousse dite à mémoire de forme
 - Matelas ou surmatelas mixte incluant une couche de mousse viscoélastique
 - Matelas ou surmatelas en mousse multistrat
- 3**
 - Matelas en mousse multistrat

LES CLASSES DES COUSSINS PRÉVENTION D'ESCARRES

- 1A**
 - Coussin à air statique
- 1B**
 - Coussin en mousse structurée formée de modules amovibles
 - Coussin en gel
 - Coussin mousse et gel
- 2**
 - Coussin pneumatique à cellules télescopiques
 - Coussin en mousse à mémoire de forme



LÉGISLATION, RESTEZ INFORMÉ

reha team assure une veille permanente sur le marché et analyse les évolutions de la législation. En tant que prescripteur, vous pouvez consulter le Décret n° 2012-860 du 5 juillet 2012 relatif aux modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale :

Extraits :

« **Publics concernés** : professionnels prescrivant ou délivrant des dispositifs médicaux individuels et prestations associées remboursables par l'assurance-maladie. Patients utilisant ces dispositifs et prestations.

Objet : fixation de conditions générales de prescription et de délivrance applicables aux dispositifs médicaux remboursables et à leurs prestations d'adaptation associées.

Entrée en vigueur : les nouvelles règles sont applicables aux ordonnances établies pour la première fois à compter du 1^{er} septembre 2012. »

« Art. R. 165-38. L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge. Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :

- La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
- La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
- Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
- Le cas échéant, l'âge et le poids du bénéficiaire des soins. »



Retrouvez l'intégralité du décret en flashant ce QR code.

Source : Légifrance.

Dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, il n'est pas question de suréquiper votre patient, mais plutôt de lui apporter de vraies solutions adaptées. Conscients des contraintes de financements auxquelles les patients doivent souvent faire face, reha team vous propose une sélection de produits et de matériels répondant à leurs attentes au meilleur rapport qualité/prix/services. Les informations suivantes vous permettront d'orienter au mieux vos patients vers les différentes possibilités de prises en charge actuelles.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter votre conseiller reha team le plus proche.



LES PRISES EN CHARGE / LES FINANCEMENTS

LPPR

Les produits et matériels répertoriés dans la LPPR bénéficient d'un remboursement (à 60% ou 100% si la personne est en ALD) sur prescription médicale (un fauteuil est toujours pris à 100% même si la personne n'est pas en ALD).

Un matériel pris à 100% ne veut pas dire qu'il est entièrement remboursé, un certain nombre de produits ont un tarif qui dépasse la base de remboursement LPPR.

La mutuelle

Si le patient cotise à une mutuelle, les produits pris en charge partiellement, bénéficient d'un complément par la mutuelle. Lorsque le tarif dépasse les 100% sécurité sociale certaines mutuelles prennent en charge au-delà des 100%.

Contactez la mutuelle pour plus de renseignements. Il n'y a pas de règle générale, chaque mutuelle est différente et dans chaque mutuelle il existe plusieurs types de contrats. Il est conseillé d'envoyer un devis à la mutuelle et de demander une réponse écrite sur leur participation.

La PCH

Sur dossier, contacter la maison départementale des personnes handicapées.

La prestation de compensation est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Ces besoins doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), sur la base du projet de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, ou en établissement. Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule) et aides animalières.

Bénéficiaires

Toute personne handicapée peut bénéficier de la prestation de compensation si :

- elle remplit des conditions de résidence spécifiques et que son handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins 1 an : une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, et qu'elle a moins de 60 ans (la demande peut être effectuée jusqu'à 75 ans dès lors que les critères étaient remplis avant 60 ans).

Les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH dès lors qu'ils répondent aux critères d'attribution de l'AEEH et de son complément, dans le cadre du droit d'option entre le complément d'AEEH et la PCH.

Une personne de plus de 60 ans qui a déjà la prestation de compensation peut continuer à en bénéficier tant qu'elle n'opte pas pour l'Allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A.)

Le montant de la PCH n'est pas lié aux revenus.

Des aides complémentaires peuvent être attribuées pour du matériel qui ne bénéficie pas d'un remboursement au titre de la PCH ou si les personnes ne répondent pas aux conditions d'obtention. Ces aides sont liées aux revenus de la personne. Un dossier doit être instruit par la MDPH.

LES PRISES EN CHARGE / LES FINANCEMENTS

APA

Pour toucher l'APA : trois conditions essentielles : âge, résidence et dépendance.

Toute personne âgée d'au moins 60 ans résidant en France qui se trouve dans **l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie** liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.

Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes, qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.» (Loi n°2001-647 du 20/07/2001).

- **L'allocation personnalisée à l'autonomie (APA)** remplace la prestation spécifique dépendance à compter du 01/01/2002.
- Elle concerne les personnes hébergées à domicile ou en établissement pour personnes âgées dépendantes.
- Elle est gérée par le **Conseil général du département**.
- Le montant de l'allocation accordée dépend du **degré d'autonomie ainsi que des ressources**.
- Elle ne fait pas l'objet de récupération sur la succession ni de l'obligation alimentaire et n'est pas l'objet d'une imposition sur le revenu.

ARDH : L'Aide au retour à domicile après hospitalisation

Ce dispositif permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'aides à domicile au sortir d'une hospitalisation. Cette aide permet la prise en charge d'aide humaine et des aides techniques ou autres. Peuvent en bénéficier les personnes :

- âgées de 60 ans et plus (ou de 55 ans en cas de perception d'une pension de réversion) qui relèvent du régime général de l'assurance-maladie et titulaires d'une pension vieillesse de la caisse régionale de l'assurance-maladie ;
- qui ont des besoins d'aides temporaires et urgents à domicile au sortir d'une hospitalisation ;
- qui ont des ressources mensuelles qui ne dépassent pas un plafond de revenus fixé chaque année.

Ne peuvent en bénéficier les personnes :

- bénéficiant de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- bénéficiant d'une Hospitalisation à domicile (HAD) ;
- percevant la Prestation de compensation du handicap (PCH) ou la Majoration tierce personne (MTP)
- relevant de soins palliatifs.

Une évaluation globale des besoins est réalisée par le service social de l'hôpital, qui après avoir mis en place le dispositif, transmet l'information au service social de la Caisse régionale de l'assurance-maladie (CRAM).

Si l'ARDH est accordée, la prise en charge est de 3 mois maximum. Dans le mois qui suit la demande, le service social de la CRAM effectue une visite à domicile afin de réajuster, si nécessaire, le dispositif.

Pour constituer ce dossier et obtenir des précisions sur cette prestation, il faut s'adresser à l'assistante sociale de l'établissement de santé où a lieu l'hospitalisation. Il doit être constitué impérativement avant la sortie de l'hôpital.

La CDAPH

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Dans chaque Maison départementale des personnes handicapées (**MDPH**), une Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (**CDAPH**) est chargée de répondre aux demandes formulées par les personnes handicapées concernant leurs droits en matière d'orientation ou d'attribution des aides et prestations. **La CDAPH remplace la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES)** et la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Pour bénéficier d'aides complémentaires pour le financement du matériel pour les enfants, contacter la MDPH.

Autres possibilités de financement

Les Comités d'entreprises :

Certains C.E mettent à disposition de leurs salariés et/ou de leurs ayants droit une ligne budgétaire dédiée au surcoût lié au handicap.





reha team, c'est plus de 180 points de vente dans toute la France. Liés aux plus grands fournisseurs nationaux et internationaux, nos conseillers sont à votre écoute et disponibles pour équiper vos patients de façon optimale.

Rendez-vous sur le site www.reha-team.fr et retrouvez le professionnel reha team le plus proche.



Confiez l'équipement et l'appareillage de vos patients à des professionnels. Soyez serein sur la qualité de nos prestations de services.

Découvrez nos labels exclusifs de qualité :



programme d'assistance maintenance pour fauteuils roulants



programme hygiène et désinfection des dispositifs médicaux



Vous êtes prescripteur, médecin généraliste ou spécialiste, et vous recherchez pour vos patients des produits de qualité, sélectionnés parmi les meilleurs fabricants. Spécialistes du matériel médical et de l'orthopédie, les adhérents du réseau reha team sont à même de vous accompagner dans ce choix, en fournissant à vos patients le meilleur de l'équipement, ainsi que les informations techniques, juridiques et pratiques indispensables.



INDEX

A

Accessoires à longs manches	39
Accessoires de lit	7, 8
Aides à la posture	9
Aides techniques au quotidien	36 à 42
Alèses	44
Analyse du risque d'escarre	20
Appui-dos	8
Arceau de lit	7
Assiette Manoy	37

B

Baignoire à porte	38
Barre d'appui	38
Bavoir	37
Boissons lactées	17
Brosse à orteil	39

C

Cadres de marche	26
Cannes	26
Cardio-fréquence-mètre	49
Ceinture d'aide à la mobilité	12
Chaise garde-robe	40
Chambre	4 à 9
Changes	44, 45
Chausse-pied	41
Chaussures de confort	42
Classes des matelas et coussins	50
Complémentation orale	1
Complémentation nutritionnelle à domicile	14 à 18
Compléments hyperénergétiques	16
Compléments hyperprotéidiques	16
Compotes	17
Compresses	49
Côté salle de bains	38
Coupe-comprimés	41
Coussins	24
Couteau-fourchette	37
Couverts coudés	37
Crème protectrice	21
Crèmes dessert	16, 17
Cuillère boucle	37

D

Dans la cuisine	37
Déambulateur inversé	33
Disque rotatif	12
Drap de glisse	11

E

Eau gélifiée	17
Échelle de Norton	20
Élévateur de bain	38
Enfile-bas	41
Enfile-bouton	41

F

Fauteuils coquille	9
Fauteuil releveur	9
Fauteuils roulants électriques adulte	30
Fauteuils roulants enfant	35
Fauteuils roulants manuels adulte	28, 29
Fauteuils verticalisateurs adulte	30
Fauteuils	9
Financements	50

G

Gâteaux	17
Gobelet caring	37
Gobelet découpe-nez	37
Grenouillères	42

H

Hygiène et confort	43 à 45
--------------------	---------

I

Incontinence	44, 45
--------------	--------

L

Lève-personne	12
Lit double	6
Lit enfant	6
Lit grande largeur	6
Lit médicalisé standard	5
Lit pour personnes agitées	6
Lits médicaux	5
Loupe	41

M

Mât de transfert	13
Matelas	21, 22, 23
Mini pedalling	49
Mobilité	25 à 35

N

Neurostimulateur	49
Nutrition entérale	18

O

Oreiller cervical	8
-------------------	---

P

Pelle et balayette à longs manches	41
Pied à sérum	7
Pincés de préhension	41
Planche de bain	38
Planche de transfert	11
Plats mixés	16
Porte-coquille	34
Positionnement	9
Potence sur pied	7
Poudres épaississantes	16
Poussettes enfant	32
Prévention et traitement de l'escarre	19 à 24
Prévention, sécurité, remise en forme et rééducation	46 à 49
Prise en charge des matelas	23
Protection de barrière	8
Protection de douche	39
Protections de literie	44

R

Rebord d'assiette	37
Rehausse-WC	40
Rehausse-jambes	8
Rollators	27

S


Sandale de douche	39
Sangle de relevage manuelle	12
Sangles de transfert	13
Scooters	31
Siège de bain pivotant	38
Siège de toilette inclinable	39
Siège de toilette/douche	40
Sièges-auto	33
Soins de toilette intime	45
Solution huileuse	21
Surélévateur de WC	40
Surmatelas	23
Système d'aide à la mobilité	7
Système de levage sur rail	12

T

Tables à manger au lit	8
Tapis de course	49
Téléassistance	47
Téléphones	48
Tensiomètres	47
Thermomètres	47
Toilettes	40
Transat de bain	39
Transfert à domicile	10 à 13
Transfert actif	13
Transfert manuel	11
Transfert passif	12
Tricycles adulte	31
Tricycles enfant	34

V

Vélo	49
Verticalisateur	13

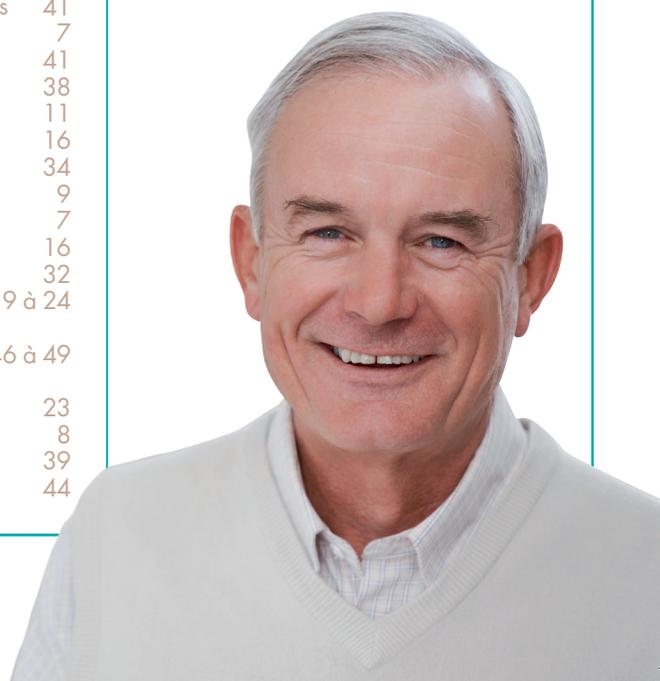



reha team

sourire à la vie!



Pour en savoir plus,
flashez ce QR code

www.rehateam.fr